

# Dusíkaté látky nebílkovinné povahy

Analytická část

Petr Breinek

# CELKOVÝ DUSÍK

= celkové množství dusíku všech dusíkatých látek

= bílkovinný + nebílkovinný dusík

Metody stanovení: **KJELDAHLOVA metoda**

V supernatantu po DEPROTEINACI (kyselinou trichloroctovou) vznikne z DUSÍKATÝCH látek (za varu po rozkladu konc.  $H_2SO_4$  a v přítomnosti katalyzátorů) SÍRAN AMONNÝ, z kterého se oddestiluje AMONIAK, který se stanoví TITRAČNĚ

Nejčastěji se jedná o odpadní látky,  
výjimku tvoří aminokyseliny

1) MOČOVINA

2) KREATININ (KREATIN)

3) KYSELINA MOČOVÁ

4) AMONIAK

5) blíže nedefinované látky + peptidy

6) AMINOKYSELINY  
(např. Homocystein)

# Jaké jsou doporučené metody?

Enzym	Referenční metoda	Certifikovaný referenční materiál
<b>Kyselina močová</b>	ID-GC/MS HPLC	SRM 909b NIST NIST/SRM 913a
<b>Močovina</b>	ID-GC/MS ID-LC/MS	SRM 909b NIST NIST/SRM 912a
<b>Kreatinin</b>	ID-GC/MS ID-LC/MS	SRM 967 SRM 909b NIST NIST/SRM 914a
<b>Cystatin C</b>	IFCC/IRMM metoda	

# Jaká je povolená chyba v EHK? (2011)

Enzym	TMU (SEKK 2011)	TMU teoretická
S-Kyselina močová	14%	12%
U-Kyselina močová	26%	29%
S-Močovina	15%	16%
U-Močovina	17%	27%
S-Kreatinin	15%	8,2%
U-Kreatinin	24%	28%
Cystatin C	15%	
Homocystein	30%	

# Močovina: výpočet teoretické TMU

(CV <sub>w</sub> ) Intraindividuální biologická variabilita*	<b>12,3%</b>	(CV <sub>a</sub> ) Přesnost odvozená z biologických variabilit	<b>6,2%</b>
(CV <sub>g</sub> ) Interindividuální biologická variabilita*	<b>18,3%</b>	(b) Systematická chyba (bias) odvozená z biologických variabilit	<b>5,5%</b>
(CV <sub>b</sub> ) Celková biologická variabilita	<b>22,0%</b>	Celková chyba (TE) odvozená z biologických variabilit Teoretická TMU (cílová nejistota měření)	<b>15,7%</b>

[www.westgard.com](http://www.westgard.com)

Variabilita (proměnlivost)

$$TE = |b| + 1,65.CV_a = 0,25.CV_b + 1,65.0,5.CV_w \quad (\%)$$

$$CV_b = \sqrt{CV_w^2 + CV_g^2} \quad [\%]$$

$$CV_a = 0,5.CV_w \quad [\%]$$

$$b = 0,25.CV_b = 0,25.\sqrt{CV_w^2 + CV_g^2} \quad [\%]$$

# Jak se získávají cílové hodnoty?

- **Referenčními metodami / postupy**

**RMP**

Reference Method Procedure

- **Validovanými metodami v expertních laboratořích**

**AV**

Assigned Value

- **Jako průměr výsledků měření všech účastníků po vyloučení odlehlých hodnot**

**ALTM**

All Laboratory Trimmed Mean

- **Průměr výsledků měření stejnorodých skupin účastníků po vyloučení odlehlých hodnot**

**ConV**

Consensus Value

# MOČOVINA (urea)

Je konečným produktem metabolismu bílkovin (aminokyselin) - detoxikace  $\text{NH}_3$





# Močovina

- **Vzniká v játrech** (cca 16g/d = 0,5-0,7 mol/d) v močovinovém cyklu  
(metabolizováním 2,9 g bílkovin vzniká 1g močoviny)
- **Vylučuje se glomerulární filtrací močí** (na rozdíl od kreatininu je zpětně resorbována), malá část je metabolizována ve střevě.

V proximálním tubulu se zpětně resorbuje 40-50% profiltrované močoviny, v distálním tubulu závisí resorpce na tom, zda je vylučována koncentrovaná nebo zředěná moč (dehydratace organismu se projevuje vzestupem močoviny).

Koncentrace v krvi závisí na:

- vylučování močovinou ledvinami močí
- její tvorbě (zvýšený rozpad bílkovin - horečka, sepse, hladovění)
- obsah proteinů v dietě

## Referenční rozmezí:

S-Močovina	muži	2,0-8,3 mmol/l
	ženy	2,0-6,7 mmol/l

dU-Močovina	167-583 mmol/24h
-------------	------------------

# Metody stanovení

## 1. REFERENČNÍ metody


### **a) ID-GC/MS ID-LC/MS**

standardní přidání značené močoviny (izotopová diluce) do analyzovaného vzorku a následné stanovení kombinací plynové nebo kapalinové chromatografie s hmotnostní spektrometrií

### **b) HPLC**

vysokoúčinná kapalinová chromatografie

## 2. Doporučená metoda (enzymová) (ureáza/GMD)

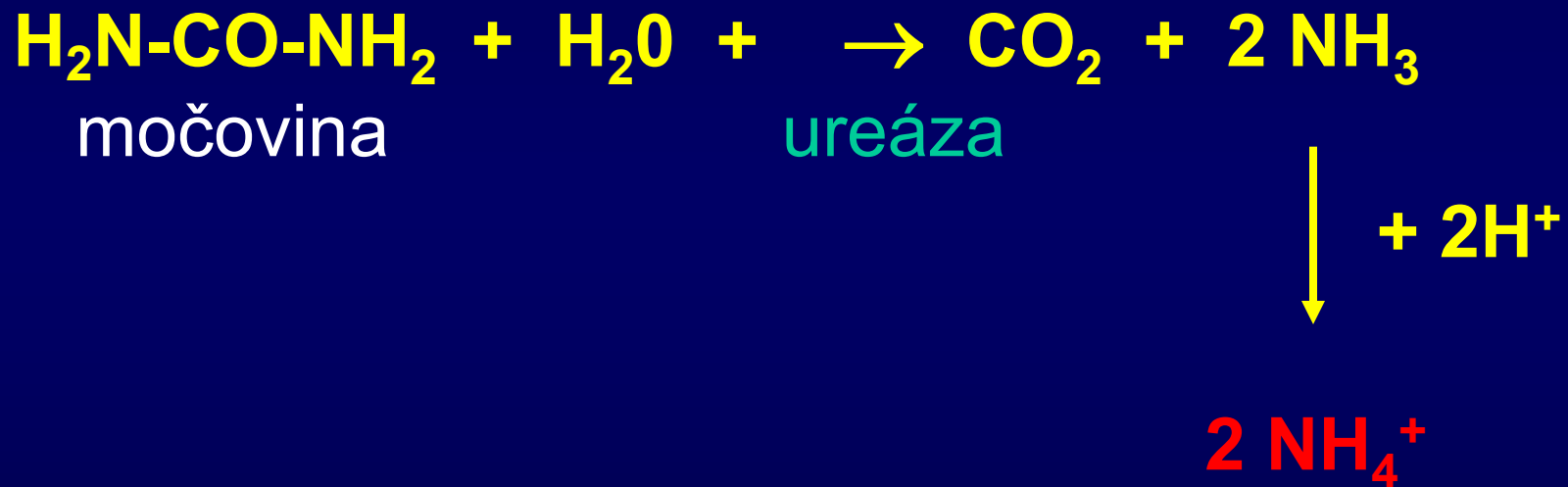




glutamátdehydrogenáza (GMD)

spektrofotometricky - pokles absorbance NADH při 340 nm

### 3. ELEKTROCHEMICKÉ metody (biosenzory)

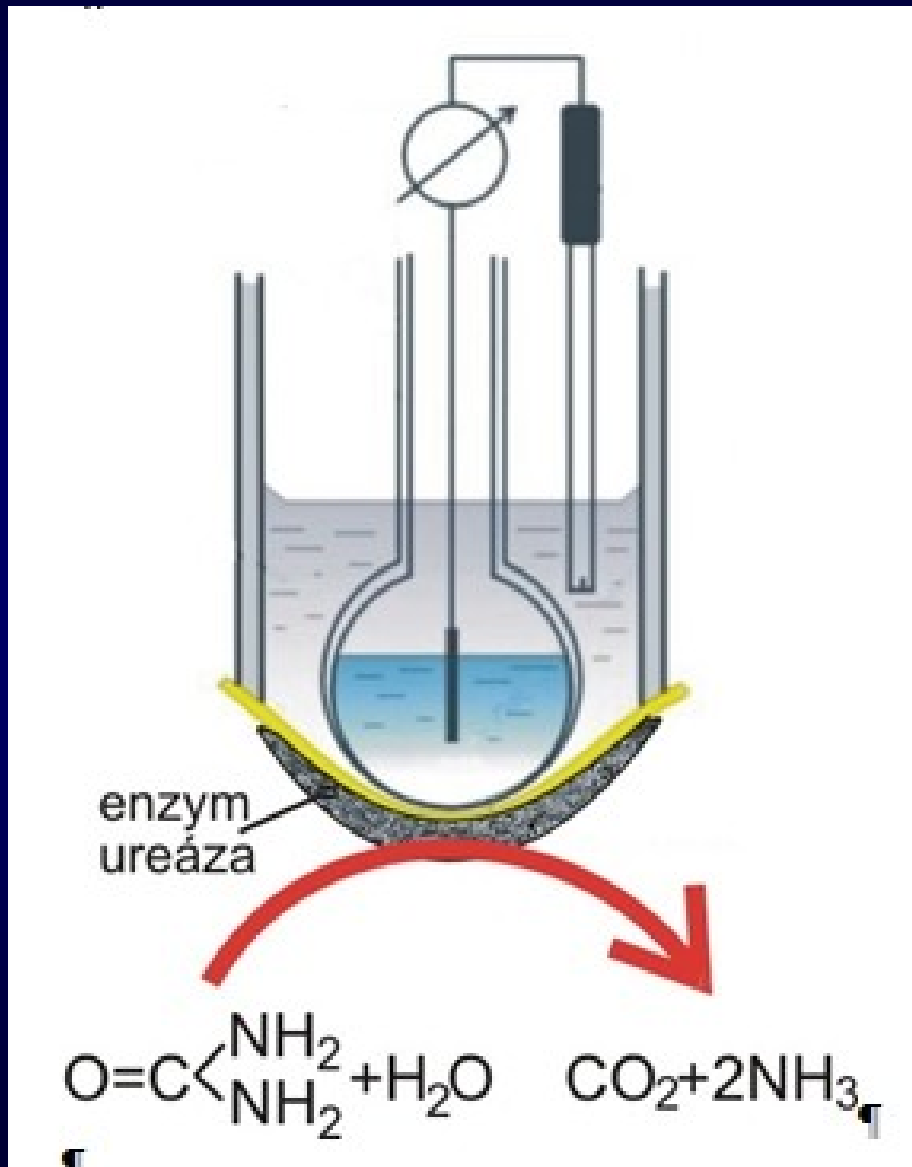

**GEM 4000,IL**



## 4. Jiné možnosti stanovení (starší metody)

- enzymové metody (ureasa/Berthelotova reakce)  
reakce amoniaku s chlornanem a fenolem za vzniku barevného (modrého) indofenolu
- chemické
  - reakce močoviny s  $\alpha$  diketony nebo jejich oximy (např. diacetylmonoxim, DAM)
  - reakce močoviny s o-ftaldialdehydem (OFA)



# KREATININ

**Kreatinin** vzniká ve svalové tkáni jako konečný produkt přeměny **kreatinu** (dehydratace).

(Kreatin vzniká v játrech, pankreatu a ledvinách, podílí se na tvorbě energie potřebné ke kontrakci svalů)

kreatin + ATP → kreatinfosfát + ADP (CK)

kreatinfosfát → kreatin → **kreatinin** + H<sub>2</sub>O

## Koncentrace v krvi závisí na:

- vylučování kreatininu ledvinami močí
- syntéze kreatinu (svalové hmotě)

## Referenční rozmezí:

S-Kreatinin	muži	60-100 $\mu\text{mol/l}$
	ženy	50- 90 $\mu\text{mol/l}$

dU-Kreatinin	8,8-15,0 mmol/24h
--------------	-------------------

# Kreatininová clearance (výpočet)

- Informace o množství krve profiltrované ledvinami za 24h (filtrační schopnost ledvin)
- Méně kvalitní ukazatel GFR než výpočet z eGFR z koncentrace kreatininu v séru
- za fyziologických podmínek nadhodnocuje glomerulární filtraci asi o 10% ,u renálního selhání o 100% (!)

Nutný sběr moče

$$GF = (U\text{-kreatinin} \times V) : S\text{-kreatinin}$$

# Doporučení IFCC

- 2005: pracovní skupina IFCC WG-GFRA  
Working Group- GFR Assessment
- **Doporučení:**  
....používání specifitějších metod na  
stanovení kreatininu ....

# Stanovisko ČSKB k současnému stavu standardizace stanovení kreatininu v séru/plasmě

- Upozornění na pozitivní bias (15 až 25%) Jaffého metody v oblasti do 130-140  $\mu\text{mol/l}$
- Bias +20  $\mu\text{mol/l}$  u Jaffého metody při koncentraci 140  $\mu\text{mol/l}$  sníží hodnotu eGFR pod rozhodovací limit (učiní ji falešně patologickou)
- Nepoužívat Jaffého metodu u dětí a novorozenců (nízká koncentrace bílkovin)
- V Německu je enzymová metoda povinně vyžadována u pacientů na dialýze
- Doporučena enzymová metoda s návazností na referenční metodu a NIST SRM 967



## Odhad glomerulární filtrace (GFR) z koncentrace kreatininu

### Zadání vstupních hodnot:

Kreatinin v  $\mu\text{mol/l}$

Věk v rocích

Pohlaví

 Muž  Žena

Výška v cm

Váha v kg

Výsledek výpočtu:



Odhad glomerulární filtrace (eGFR) je podle rovnice Lund-Malmö: 1,01 ml/s na 1,73 m<sup>2</sup>

rovnice CKD EPI: 1,13 ml/s na 1,73 m<sup>2</sup>

rovnice Lund: 1,01 ml/s na 1,73 m<sup>2</sup>

rovnice MDRD (IDMS traceable): 1,13 ml/s na 1,73 m<sup>2</sup>

rovnice Mayo Clinic: 1,43 ml/s na 1,73 m<sup>2</sup>

[Návrat](#)



## Odhad glomerulární filtrace (GFR) podle rovnice MDRD (Modification of Diet in Renal Disease)

### Zadáni vstupních hodnot:

Kreatinin v plazmě (séru) v  $\mu\text{mol/l}$



nová kalibrace IFCC

Věk v letech

Pohlaví

 Muž  Žena

Urea v plazmě (séru) v  $\text{mmol/l}$

Albumin v plazmě (séru) v  $\text{g/l}$

Výsledek výpočtu (v  $\text{mls}^{-1} (1,73\text{m}^2)^{-1}$ ):



Odhad glomerulární filtrace (GFR) podle rovnice MDRD = 1,08

Návrat



# 1. Referenční metoda

## ID-GC/MS a ID-LC/MS

standardní přidání značeného kreatininu (izotopová diluce) do analyzovaného vzorku a následném stanovení kombinací plynové nebo kapalinové chromatografie s hmotnostní spektrometrií

- Certifikovaný referenční materiál

**SRM 967** (SRM-NIST 909b, SRM-NIST 914)


# Kreatinin enzymaticky

1. Stanovení **kreatinu** vzniklého z kreatininu

- kreatininasa/kreatinasa/SOX/POD
- kreatininasa/CK/PK/LD

2. stanovení **amoniaku** vzniklého z kreatininu

- Kreatininiminohydrolasa//G1DH

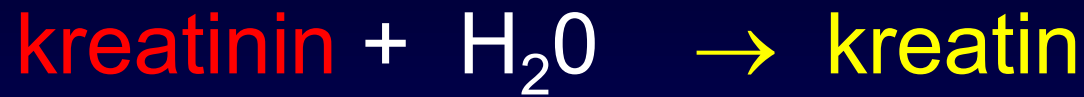

kreatininasa



kreatinasa



sarkosinoxidasa



peroxidasa (oxidační kopulace)

# Princip a postup měření


## 1. vzorek + R1



- Odstranění endogenního kreatinu,  
 $\text{H}_2\text{O}_2$  (katalasa), kyseliny askorbové (AOX)


## 2. + R2



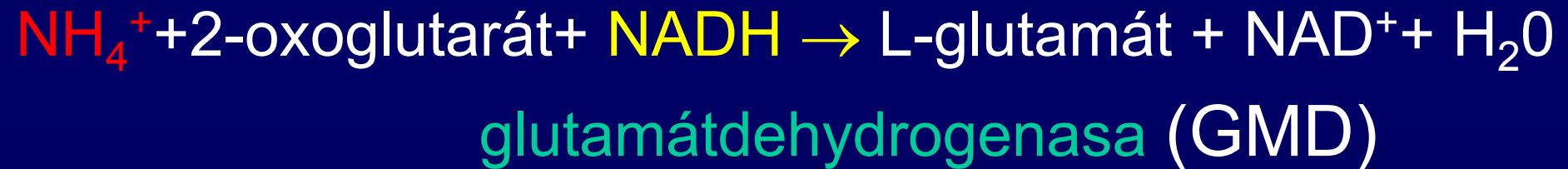

Spektrofotometricky, pokles absorbance NADH při  
340nm

## *Jiný princip enzymového stanovení*

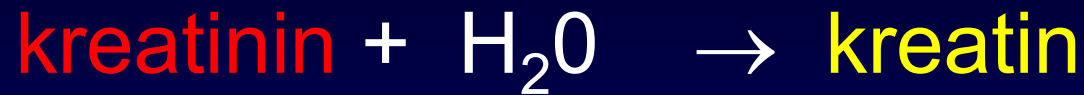

kreatininasa



kreatinkinasa (CK)



pyruvátkinasa (PK)



laktátdehydrogenasa (LD)


Spektrofotometricky, pokles absorbance NADH při  
340nm

# Metody využívající Jaffeho reakci

kreatinin +  
kyselina pikrová

alkalický roztok

komplex kreatinin-  
kyselina pikrová

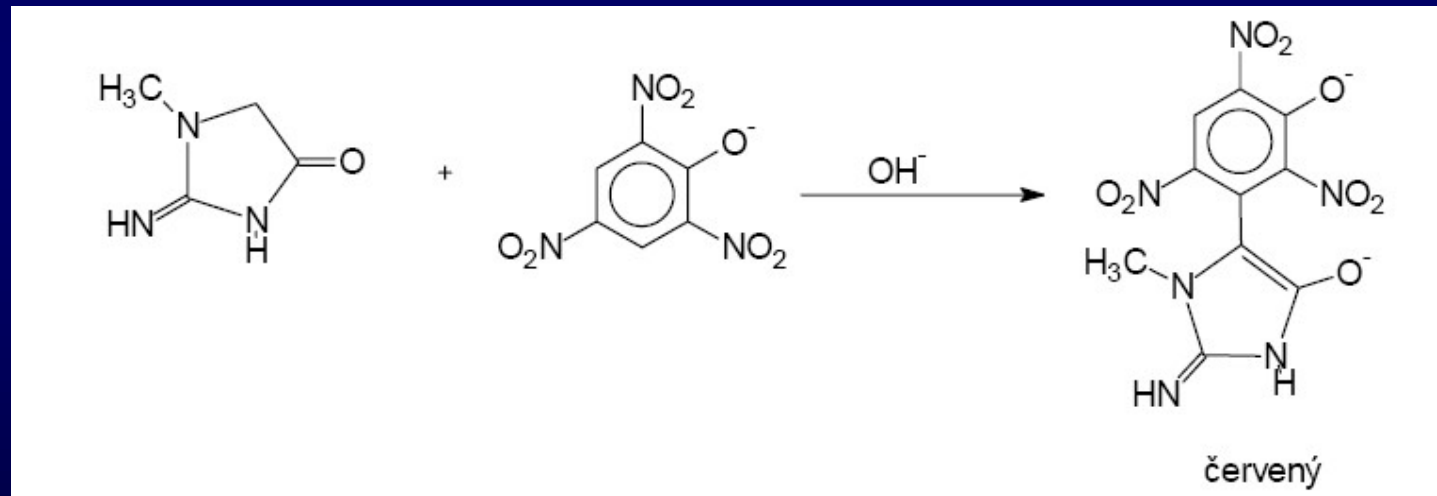

- Nespecifičnost měření
- Reagují: proteiny, ketony, bilirubin, některé léky,...

## 4. Jiné metody:

a) elektrochemické metody (**biosenzory**)

POCT

b) HPLC

c) CE





# KYSELINA MOČOVÁ (1,3,8-trioxypurin)

U člověka je konečným produktem metabolismu purinů.

Puriny jsou součástí nukleových kyselin (DNA), do krve se dostávají z potravy nebo při rozpadu a obnově buněk těla.

**Je málo rozpustná** a cirkuluje v krvi v hladinách blízkých hodnotě, při které již není rozpustná.

Sodná sůl je rozpustnější (uráty).

U lidí a primátů chybí enzym urikáza, která umožňuje přeměnu kyseliny močové na lépe rozpustný allantoin.

Je vylučována z 1/3 zažívacím traktem a ze 2/3 ledvinami. Není to jen látka odpadní, má význačný antioxidační účinek.

Zvýšenou koncentraci v krvi (hyperurikemie)  
způsobuje:

- její **zvýšená produkce** (maso, zvýšená degradace buněk-leukémie)
- její **snížené vylučování**

## Referenční rozmezí:

S-Kyselina močová     muži   200-420  $\mu\text{mol/l}$   
                                  ženy   140-340  $\mu\text{mol/l}$

dU-Kyselina močová     0,5-6,0 mmol/24h

# Metody stanovení

## 1. Referenční metody

### ID-GC-MS a HPLC

standardní přidání značené 1,3-<sup>15</sup>N kyseliny močové (izotopová diluce) do analyzovaného vzorku a následné stanovení plynovou chromatografií s hmotnostní spektrometrií


nebo stanovení kyseliny močové vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií (HPLC)


## 2. Doporučená rutinní metoda

(enzymové stanovení, urikáza/peroxidáza)





urikáza

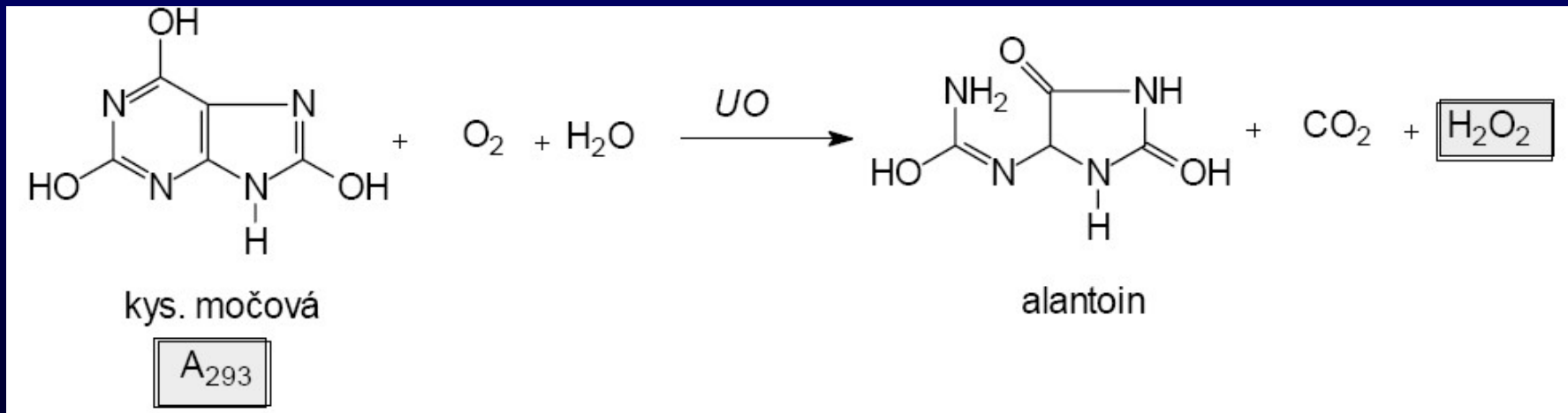

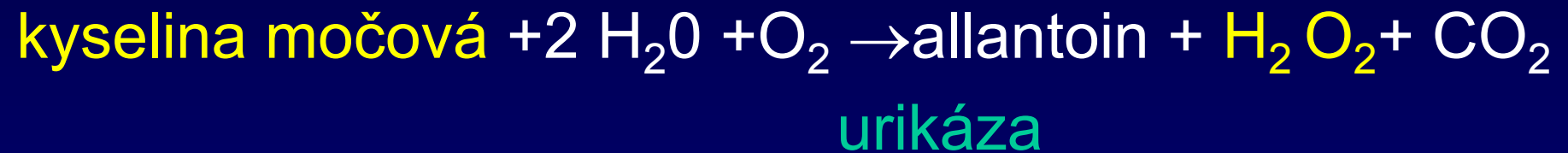

### 3. Jiný princip enzymového stanovení (urikasa/kataláza)

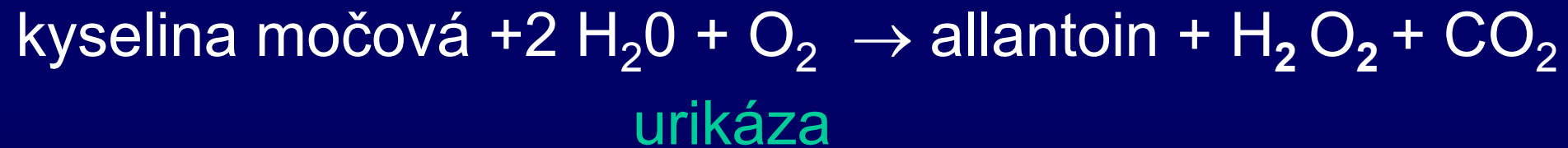

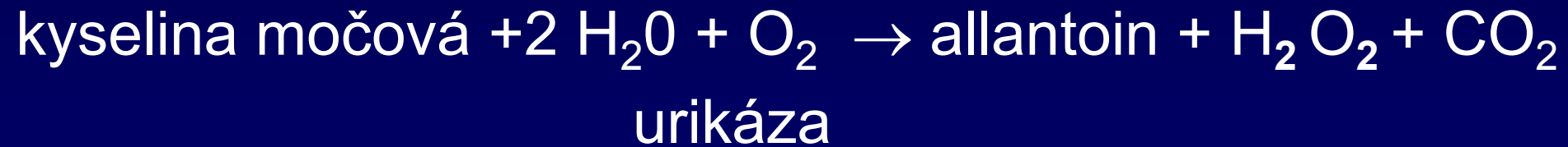

HANTZSCHOVA kondenzační reakce (A 405nm)



## 4. ENZYMOVÉ stanovení (urikasa/UV)

282-293 nm

## 5. Chemické metody

založené na redukčních vlastnostech kyseliny močové (oxidace)

např. redukce kyseliny fosfowolframové v alkalickém prostředí za vzniku wolframové modře

# AMONIAK ( $\text{NH}_3$ ), amonný kation $\text{NH}_4^+$

Vzniká při **degradaci bílkovin (aminokyselin)** ve všech tkáních, především v játrech (také v ledvinách a svalech).

Nezanedbatelným zdrojem amoniaku je také rozklad bílkovin bakteriálními enzymy ve střevě.

**Je toxický, v játrech je přeměňován na močovinu a glutamin.**

V mozku a jiných tkáních, které nemají schopnost tvořit močovinu, se amoniak detoxikuje transaminační reakcí s 2-oxoglutarátem, za vzniku glutamátu.

## Zvýšená koncentrace v plazmě:

- **Závažné jaterní onemocnění**
- Snížení průtoku krve játry
- Při vrozených poruchách enzymů v močovinovém cyklu
- **Reyeův syndrom** (vzácné poškození krve, jater a mozku, většina případů je vyvolána virovou infekcí)
- Selhání ledvin

## **Preanalytika:**

Krev se musí po odběru ihned zchladit a zpracovat co nejdříve (30min), neboť hrozí falešně zvýšené hodnoty.

## Referenční rozmezí:

P-Amoniak	muži	15 - 55 $\mu\text{mol/l}$
	ženy	11 - 48 $\mu\text{mol/l}$
		18 - 72 $\mu\text{mol/l}$

## Metody stanovení:

1. Referenční metoda: není k dispozici
2. Rutinní metody
  - a) enzymové metody (GMD/UV)



spektrofotometricky

pokles absorbance NADH při 340 nm

### 3. Elektrochemické metody (biosenzory, POCT)

- přímá potenciometrie
- konduktometrie

### 4. Jiné možnosti stanovení

- chemické metody
- mikrodifuzní metody

# Homocystein

- neesenciální siriá aminokyselina
- není součástí tělesných bílkovin
- vzniká v organismu při přeměně methioninu (Met) na cystein(Cys)  
jako degradační produkt S-adenosylmethioninu (donor methylenové skupiny)
- **nezávislý rizikový faktor**



# Nezávislý rizikový faktor

- kardiovaskulární onemocnění
- periferní vaskulární onemocnění (arteriální i žilní trombóza)
- cerebrovaskulární onemocnění
- opakované ztráty plodu

Rizikový faktor je přibližně stejný jako u hyperlipidémie a kouření.

Referenční rozmezí:

P-Homocysteinin      5-15  $\mu\text{mol/l}$

## Metody stanovení:

### 1. Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC)

- (deproteinace)
- redukce
- derivatizace
- analýza
- detekce (fluorometrická)

## 2. Imunochemické metody

- Redukce oxidovaných forem (např. 1,4-dithio-D,L-threitol)
- Enzymatická přeměna homocysteinu na S-adenosylhomocystein
- Kompetitivní imunochemická reakce se specifickou monoklonální protilátkou
- Detekce  
ELISA, imunoturbidimetrie, chemiluminiscence,...

### 3. Enzymová metoda („cyklická“):



CBS (cystathion  $\beta$ -syntáza)



BBL (cystathion  $\beta$ -lyáza)



LD (laktátdehydrogenáza)

**SPEKTROFOTOMETRICKY**

(pokles absorbance při 340 nm)

## 4. Kombinace plynové chromatografie s hmotovou spektrometrií (GC-MS)