

Cíle studia přenosu genů do živočišných buněk

1. Přenos genů do živočišných buněk
 - vyhledávání genů, poznání jejich funkce a regulace,
 - studium procesů diferenciace a jejich poruch
 - heterologní exprese, tvorba cizorodých proteinů
2. Příprava transgenních organismů
 - studium fungování genů v rámci celého organismu
 - příprava živočichů s cíleně upravenými geny
 - modely pro studium genetických chorob
 - příprava zvířat s lepšími užitkovými vlastnostmi,
 - vytváření cizorodých proteinů (animal farming)
 - hledání možností pro genovou terapii

Způsoby přenosu DNA do buněk živočichů


(volná DNA nebo DNA klonovaná ve vektorech)

- transfekce (Ca-precipitace, kotransfekce)
- elektroporace
- infekce (virové vektory)
- lipofekce
- mikroinjekce
- fúze buněk (savčích, bakteriálních protoplastů)


Exprese transgenu:

- transientní (přechodná)
- stabilní

Způsoby přenosu cizích genů do savčích buněk

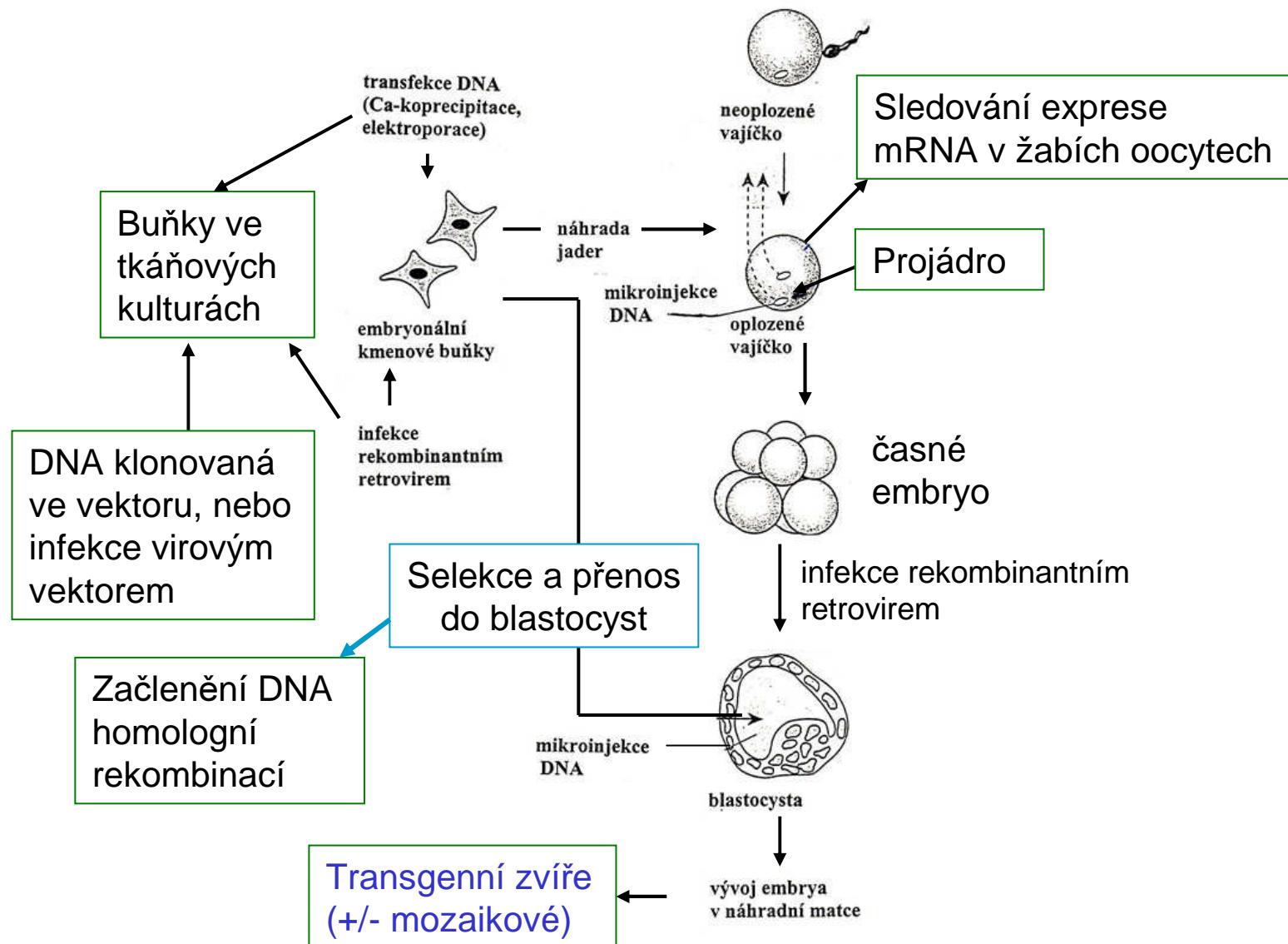

Možnosti přípravy geneticky modifikovaných myší

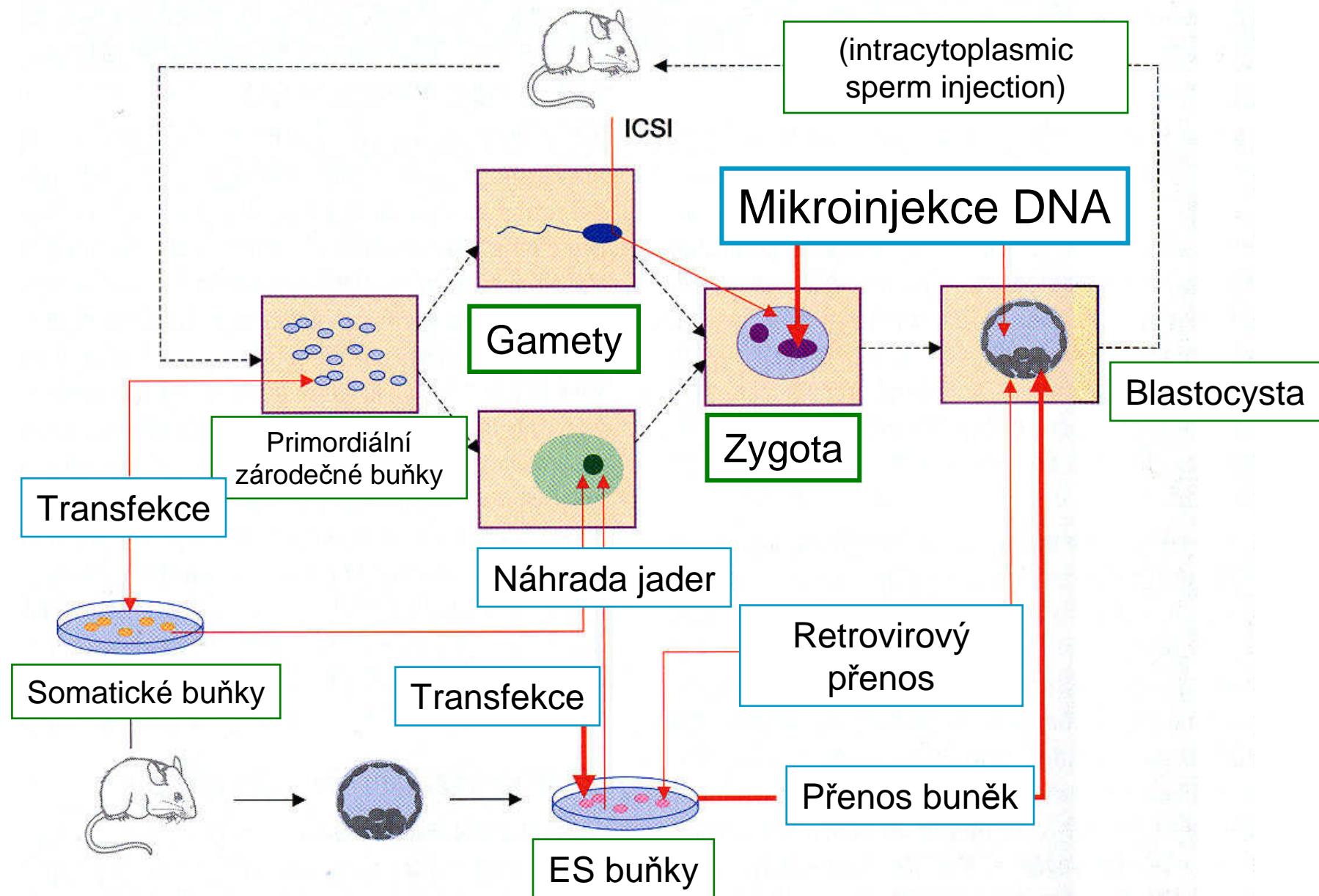

Selekční markery pro přenos genů do eukaryot

Enzym	Selekční látka	Mechanismus selekce
Aminoglykozidfosfotransferáza (APH) neo	G418 (inhibice syntézy proteinů) (kanamycin, neomycin)	APH inaktivuje G418
Dihydrofolátreduktáza (DHFR)	Metotrexát (Mtx) (inhibuje DHFR)	variantha DHFR rezistentní k Mtx, počet kopií
Hygromycin-B-fosfotransferáza (HPH) (Hyg)	Hygromycin-B (inhibuje syntézu proteinů)	HPH inaktivuje hygromycin B
Tymidinkináza (TK)	Aminopterin (inhibuje syntézu purinů de novo a syntézu timidylátu)	TK syntetizuje timidylát
Xantin-guanin-fosforibozyltransferáza (XGPRT) (Ecogpt)	Mykofenolová kyselina (inhibuje syntézu GMP de novo)	XGPRT syntetizuje GMP z xantinu
Chloramfenikoltransferáza (CAT) Reportérový gen	Chloramfenikol (Clm) (inhibice biosyntézy mt proteinů)	CAT inaktivuje Clm
Hypoxantinguaninfosforibozyl-transferáza (HGPRT)	Aminopterin (inhibuje syntézu purinů de novo)	HGPRT syntetizuje puriny z hypoxantinu

Luciferáza
GFP
beta-glukozidáza


reportérové geny

Selective marker gene systems for mammalian cells

Selective agent	Action of selective agent	Marker gene	Action of marker gene protein
Xyl-A	Damages DNA	Adenine deaminase (<i>ada</i>)	Deaminates Xyl-A
Blasticidin S	Inhibits protein synthesis	Blasticidin S deaminases (<i>Bsr</i> , <i>BSD</i>)	Deaminates blasticidin S
Bleomycin	Breaks DNA strands	Bleomycin-binding protein (<i>Ble</i>)	Binds to bleomycin
G-418 (Geneticin)	Inhibits protein synthesis	Neomycin phosphotransferase (<i>Neo</i>)	Phosphorylates G-418
Histidinol	Produces cytotoxic effects	Histidinol dehydrogenase (<i>hisD</i>)	Oxidizes histidinol to histidine
Hygromycin B	Inhibits protein synthesis	Hygromycin B phosphotransferase (<i>Hph</i>)	Phosphorylates hygromycin B
MSX	Inhibits glutamine synthesis	Glutamine synthetase (<i>GS</i>)	Cells that produce excess glutamine synthetase survive
MTX	Inhibits DNA synthesis	Dihydrofolate reductase (<i>dhfr</i>)	Cells that produce excess dihydrofolate reductase survive
PALA	Inhibits purine synthesis	Cytosine deaminase (<i>coda</i>)	Lowers cytosine levels in the medium by converting cytosine to uracil
Puromycin	Inhibits protein synthesis	Puromycin N-acetyltransferase (<i>Pac</i>)	Acetylates puromycin

MSX, methionine sulfoximine; MTX, methotrexate; PALA, N-(phosphoacetyl)-L-aspartate; Xyl-A, 9-β-D-xylofuranosyl adenine

Selekční media pro enzymy Tk, HGPRT a XGPRT

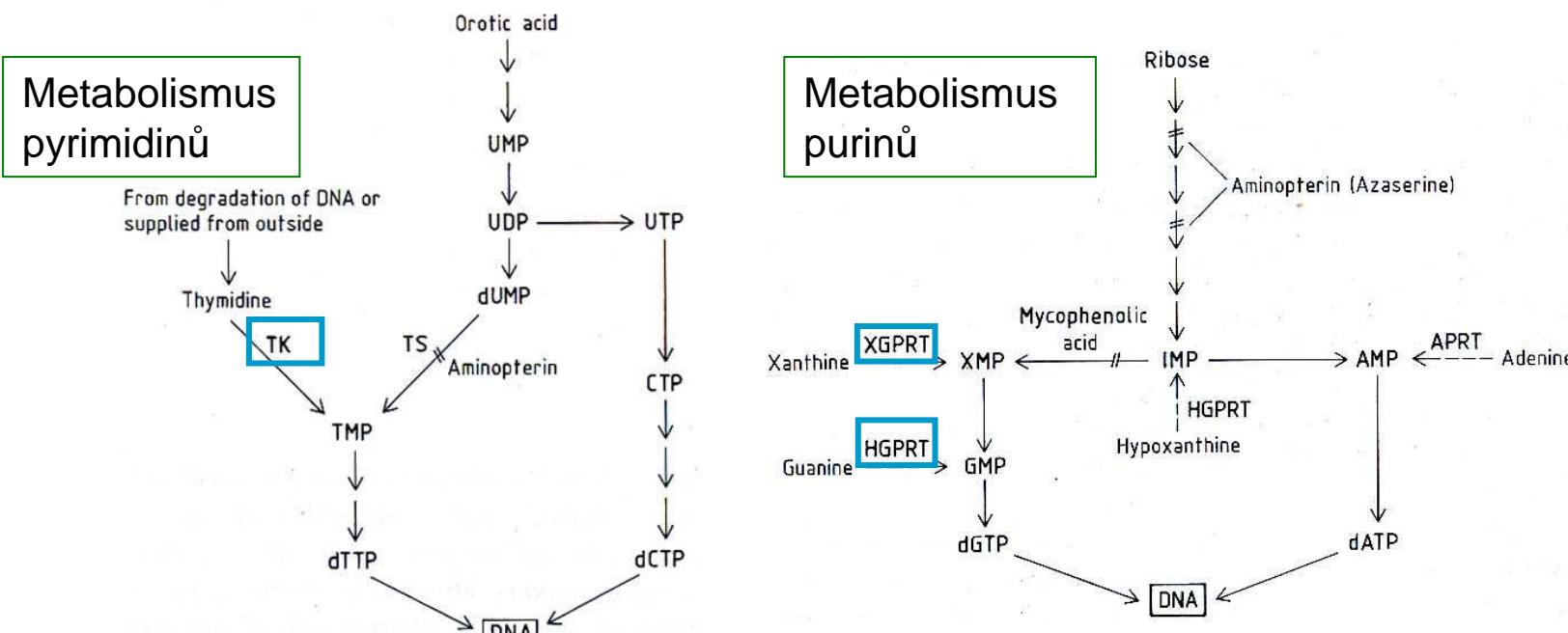

Selekční systémy Tk, HGPRT, XGPRT


A	HAT	BrdU
Tk ⁺	+++	- - -
Tk ⁻	- - -	+++
B	HAT	6-Thioguanine XAT 8-Azaguanine
HGPRT ⁺	+++	- - -
HGPRT ⁻	- - -	+++
HGPRT ⁺ (Ecogpt ⁺)	+++, .	- - -
		+++

Medium HAT

Hypoxanthin = zdroj purinů,
Aminopterin = blokuje
syntézu nukleotidů de novo
Tymidin = zdroj tyminu

(- - -) indicates that cells do not grow and do not survive under these conditions. (++) indicates that cells either grow or only survive as in the case of Tk⁻ cells in the presence of bromodeoxyuridine (BrdU). HAT stands for hypoxanthine-aminopterin-thymidine medium, X for xanthine.

Připravena řada
linií lidských a
hlodavčích tk⁻
buněk

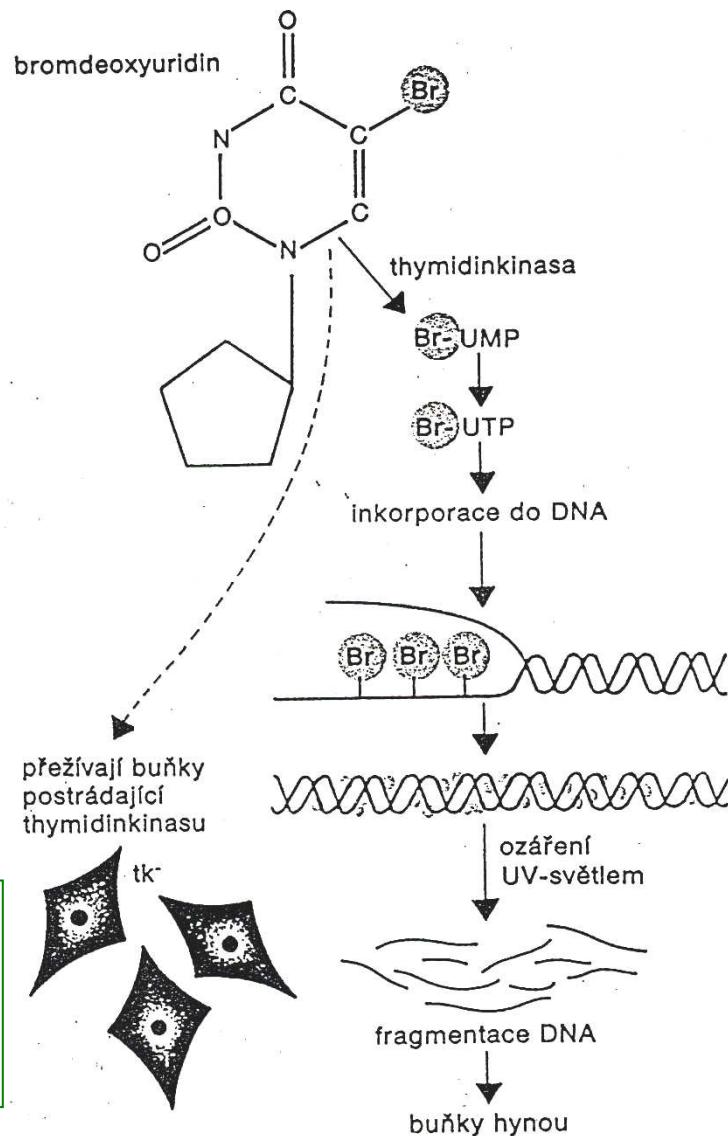


Postup při izolaci mutant tk⁻. Buňky s funkčním enzymem thymidinkinasou fosforylují bromdeoxyuridin (BrU-dr) na BrUMP, který je potom inkorporován do buněčné DNA. Bromovaná DNA je extrémně citlivá na ozáření UV světlem, po kterém buňky hynou. Vzácné mutanty tk⁻ ozáření přežívají.

Transientní a stabilní exprese genů v živočišných buňkách

Analýza exprese genů.
Studium regulačních oblastí, sestřihu; příprava velkých množství mRNA nebo proteinů

Selekce klonů s DNA stabilně integrovanou do genomu

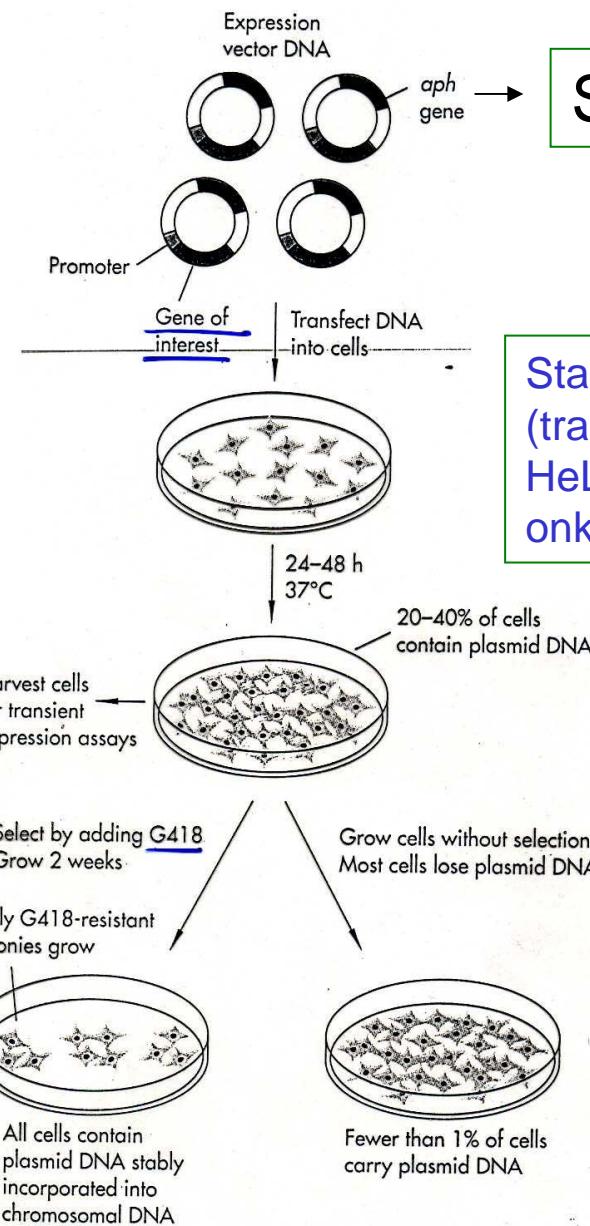

Selekce G418

Stabilní buněčné linie
(transformované buňky:
HeLa, CHO aj. po infekci
onkogenními retroviry)


DNA, která se do genomu neintegrovala, se z buněk postupně vyředí

Osud přenášené plazmidové DNA v recipientní buňce

1. Transfekce cizorodé + nosičové DNA = vytváření konkatemerů
 - **transgenom** (selektovatelný marker, neselektovaný gen-nosičová DNA) začleněný v jedné kopii v libovolném úseku genomu. Později často dochází k částečné nebo úplné deleci transgenomu
2. Transfekce (Ca-P) čisté plazmidové DNA bez nosičové DNA = plazmidy jsou stabilně integrovány do jednoho až pěti různých míst genomu, kde se nacházejí převážně v jedné kopii.
3. Elektroporace čisté plazmidové DNA = nízký počet integrovaných plazmidových molekul
4. Mikroinjekce plazmidu do buněčného jádra
 - a) při vysoké koncentraci DNA dochází k inkorporaci dlouhých konkatemerů (hlava-pata),
 - b) při malém množství DNA se začlení jednotlivě.

Po linearizaci plazmidu přibývá pravděpodobnost tvorby konkatemerů a začlenění do genomu, přičemž nehraje roli, kterou metodou byla DNA plazmidu vnesena.


Kotransfekce několika druhů molekul DNA

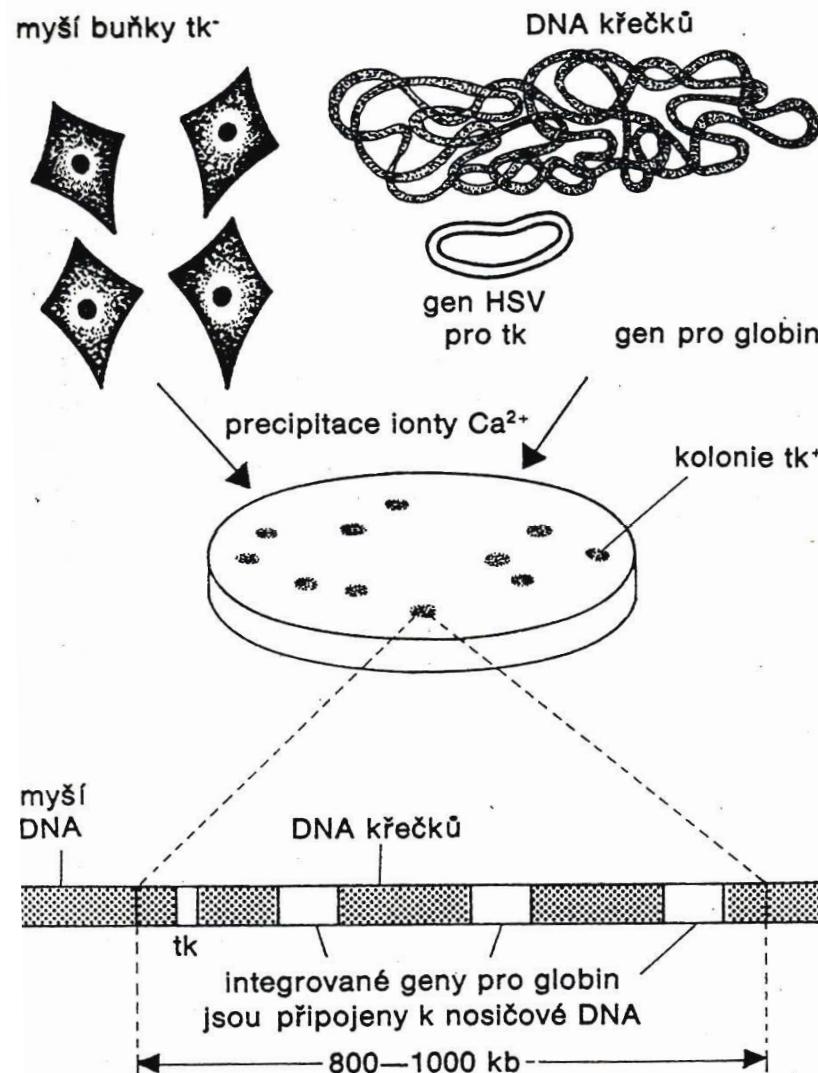

Kotransformace během přenosu genů. Při transfekci tk do eukaryontních buněk pomocí precipitace Ca^{2+} je část nosičové DNA a jakákoliv další DNA přítomna v precipitátu spojena dohromady do velkých struktur (800 až 1000 kb) a včleněna do chromozómu.

transgenom


Izolace genu pro tk z kuřecích buněk – „plasmid rescue“

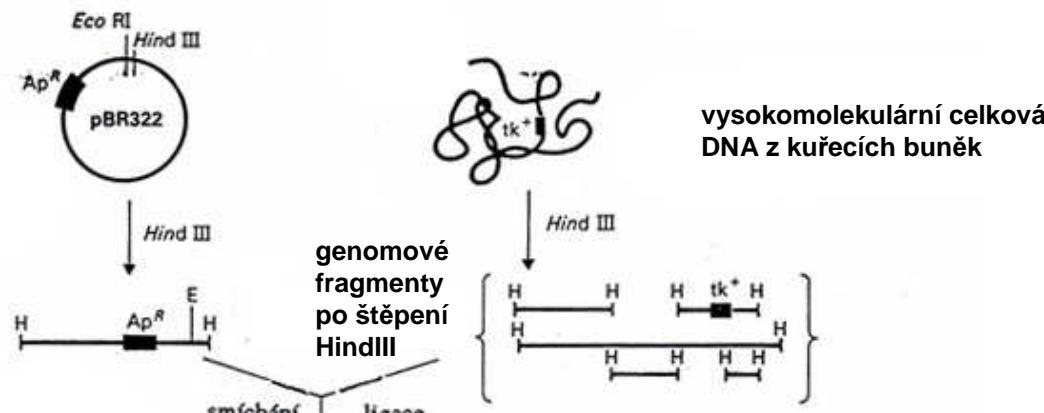

možnost izolovat každý gen, který je v kultuře na základě svých fenotypových vlastností selektovatelný nebo nějak poznatelný.

Ca-koprecipitace


Vyředí se plazmidy s neselektovanými znaky (tj. plazmidy nevázané s tk+)

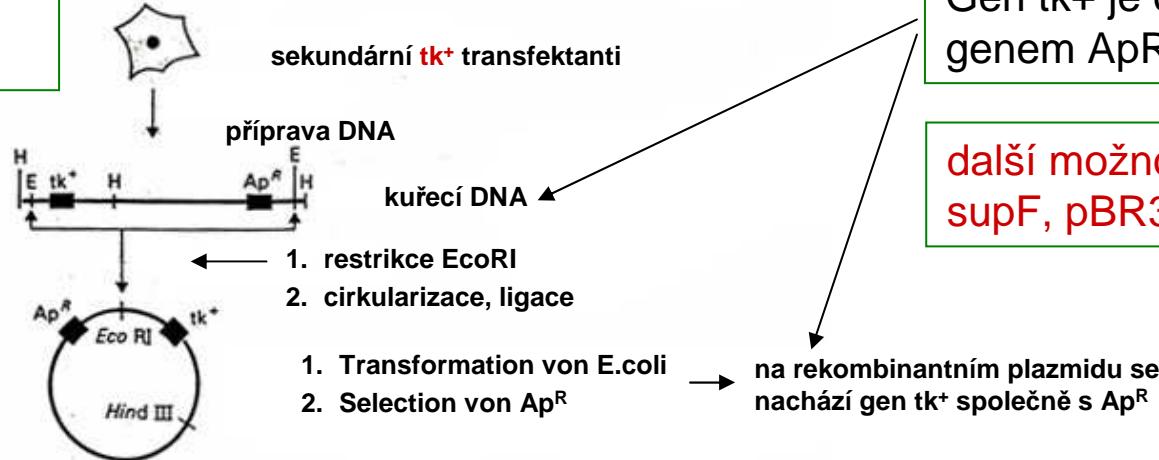

Gen tk+ je označen genem ApR

další možnosti značení: supF, pBR322, alu

na rekombinantním plazmidu se nachází gen tk+ společně s Ap^R

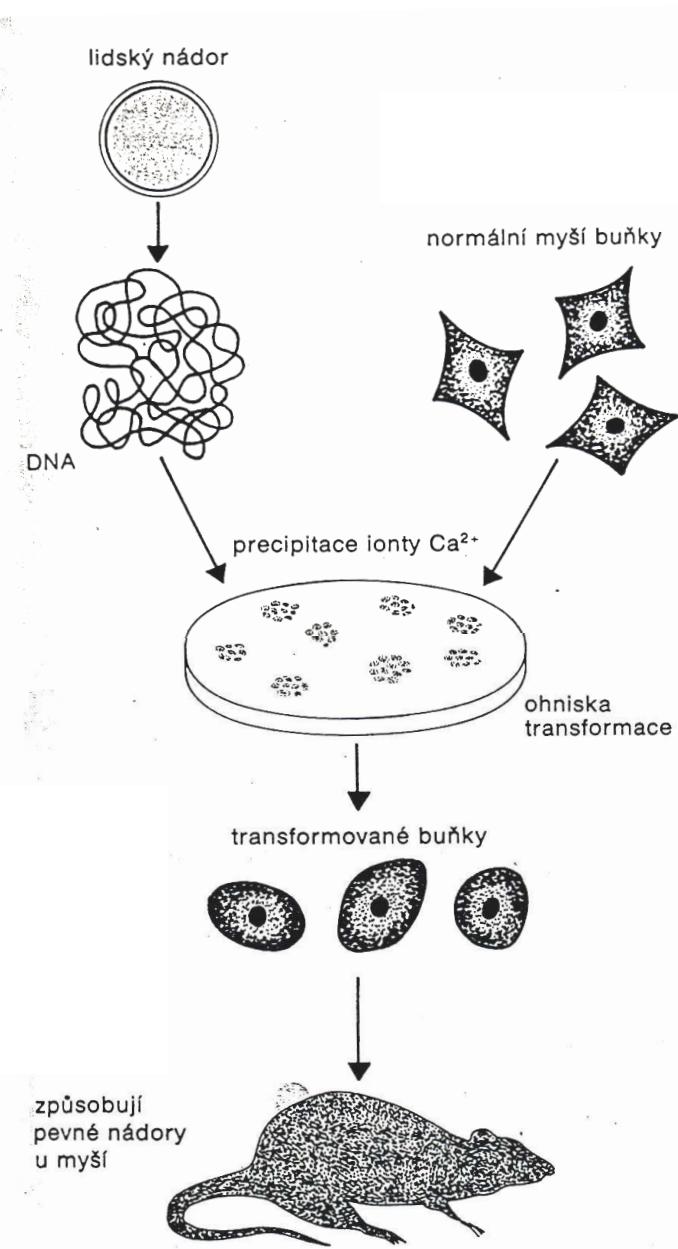

Selekce úspěšně transfektovaných buněk na základě změny jejich fenotypu

Přenos lidských onkogenů do myších buněk. Po transfekci myších buněk DNA získanou z lidských nádorů se za několik týdnů objeví malá ohniska transformovaných myších buněk. Výsledkem injikace takových buněk myším jsou pevné nádory.

Vektory pro přenos genů do živočišných buněk


1. Plazmidové vektory („neživé“): plazmid se nereplikuje, vzácně se začleňuje do genomu buňky
 - prokaryotický plazmid + eukaryotická transkripční jednotka + selekční marker

Využívají se k selekci transfektovaných buněk při kotransfekci a sledování transientní exprese genů


2. Virové vektory („živé“): kyvadlové vektory, replikující se v hostitelských buňkách
 - část bakteriálního vektoru + sekvence eukaryotických virů + selekční marker
 - vektory odvozené z SV40, bovinního papilomaviru, EBV, retrovirů, bakulovirů, viru vakcinie, adenovirů aj.

Využívají se ke sledování stabilní nebo transientní exprese genů a k získávání rekombinantních proteinů ve velkém množství

Konstrukce pSV vektorů

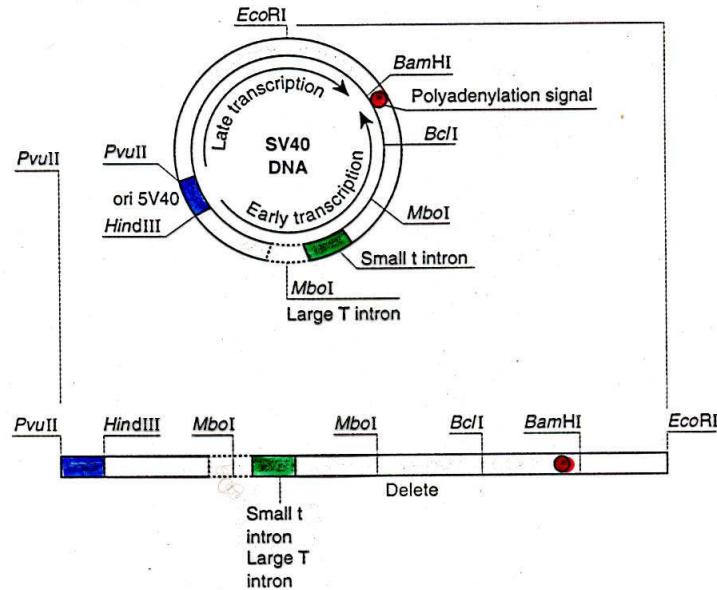


Transkripční regulační sekvence z viru SV40

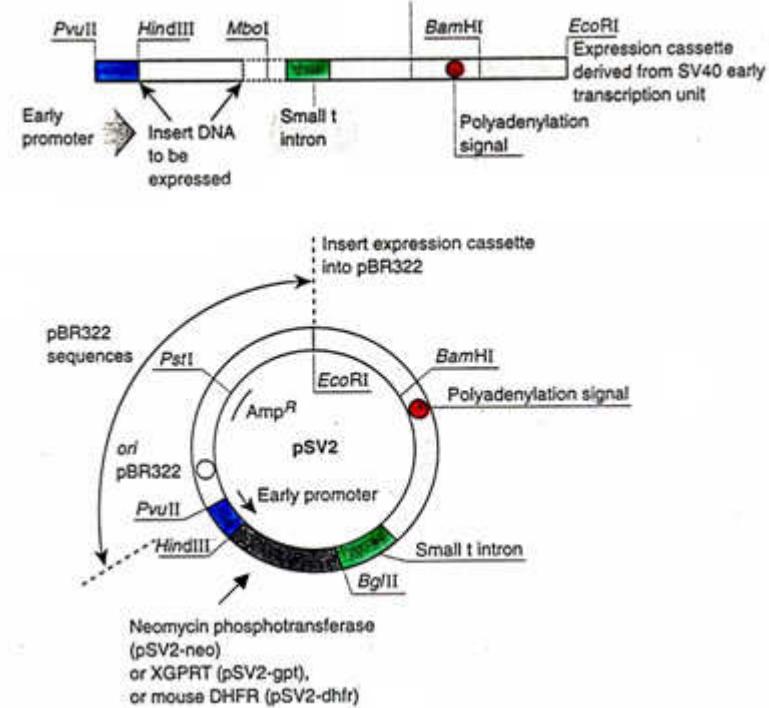

Kyvadlový vektor

„Plazmidy pSV“

Expresní vektor pro savčí buňky

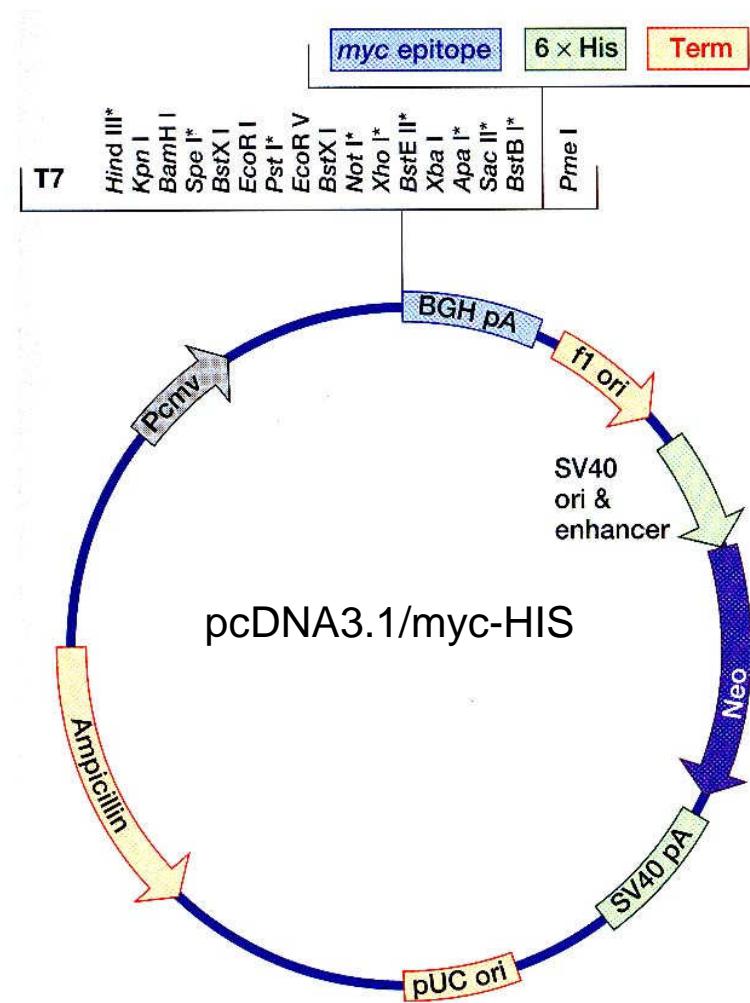

Pcmv – promotor cytomegaloviru

BGHpA = polyadenylační sekvence BGH

Neo = rezistence k G418


6 x HIS = purifikace proteinu (tag)

myc epitop = detekce proteinu protilátkou

T7 - sekvencování

Sekvence aktivní v *E. coli*:
AmpR, pUC ori, f1 ori

Expresní vektor savčí buňky

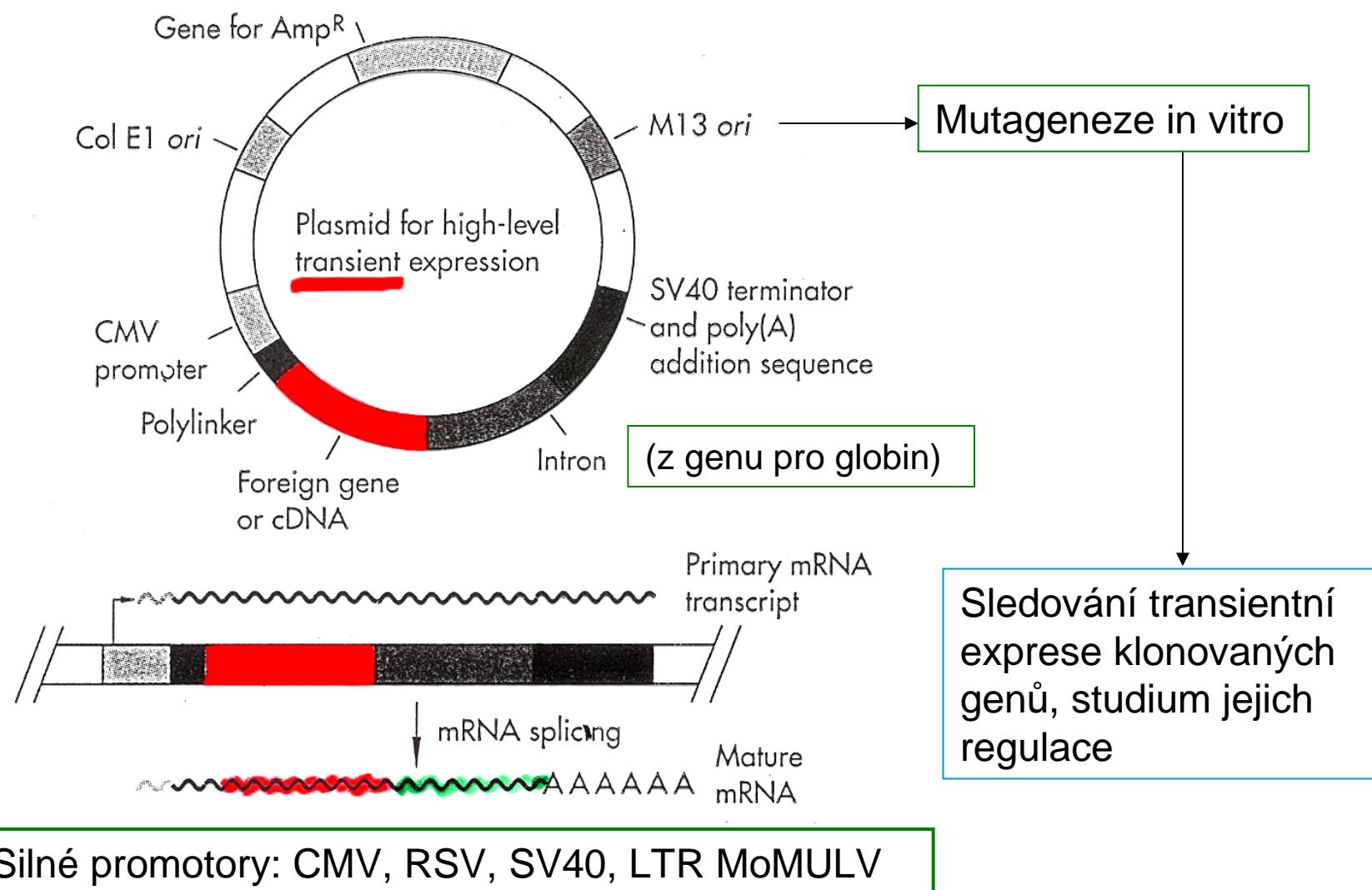

Sekvence na vektoru zajišťující translaci



K = Kozakova sekvence; S = signální sekvence; T = tag – purifikace proteinu;
P = místo štěpení proteinu – oddělení tag od zralého proteinu; SC = stop kodon


- Vznik sekundární struktury v 5' nepřekládané oblasti mRNA zabraňuje účinné translaci –
- Kozakova pravidla – sekvence v oblasti AUG: CC(A/T)CC**AUGG**
- Iniciační kodony uvnitř 5' nepřekládané oblasti snižují účinnost iniciace translace od správného iniciačního kodonu, zvláště pokud po „upstream“ AUG nenásleduje ve čtecím rácmi stop kodon – často je žádoucí zkrátit 5' netranslatovanou oblast mRNA.
- Sekvence bohaté na AU v 3' netranslatované oblasti mRNA mohou snižovat její stabilitu
- Kodony lze upravit pro daný hostitelský organismus

Kozak Sequence

Most eukaryotic mRNAs contain a short recognition sequence that greatly facilitate the initial binding of mRNA to the small subunit of the ribosome. The consensus sequence for initiation of translation in vertebrates (also called Kozak sequence) is: ACCATGG More general it is: (GCC) RCCATGG

where R is a purine (A or G). To improve expression levels, it may be advantageous to design the cloned insert according to Kozak's rules.

Savčí expresní vektor – obecná struktura

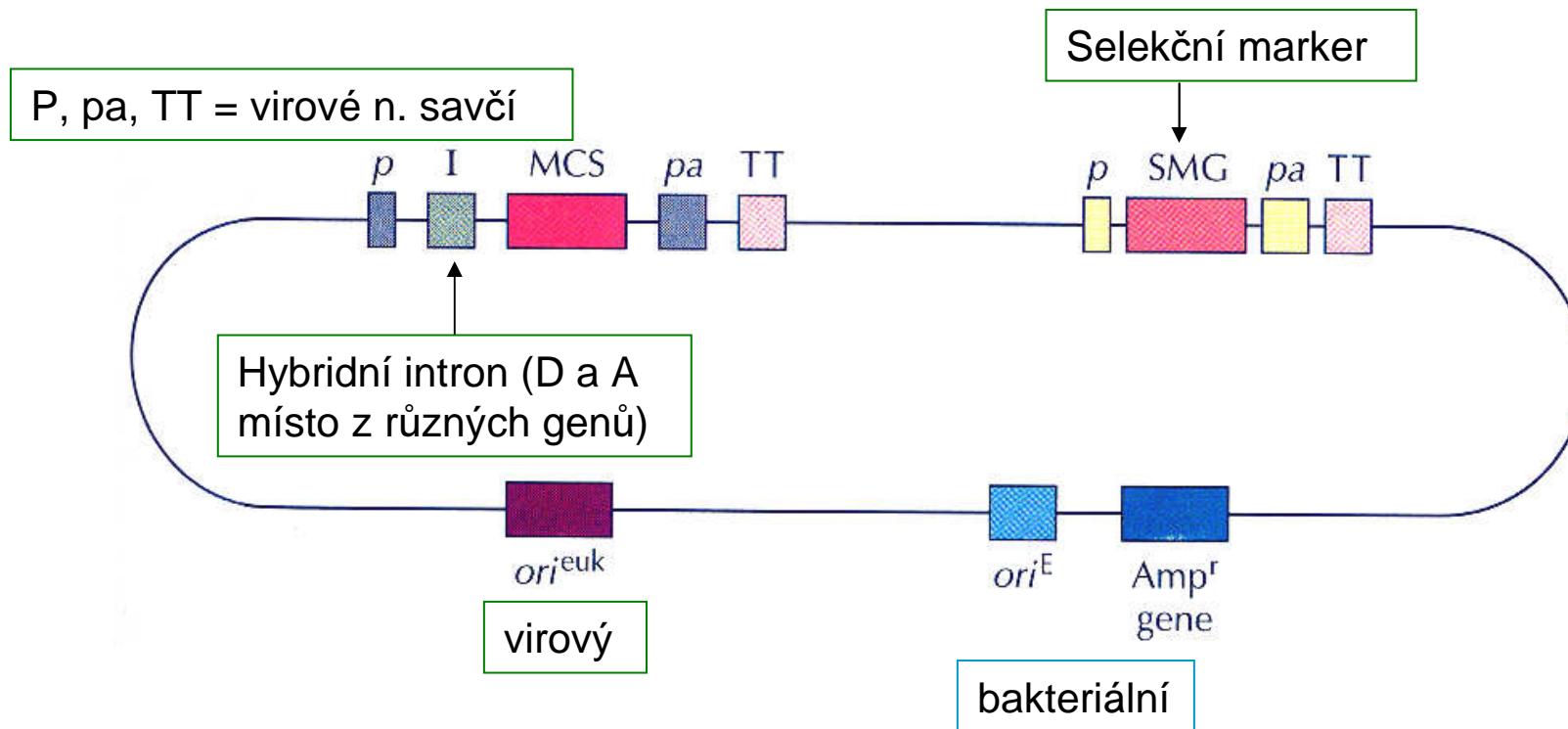

Hostitelské buňky:

- Pro transientní expresi: Cos, BHK (baby hamster kidney), HEK (human embryonic kidney)
- Pro stabilní expresi CHO (chinese hamster ovary)

Řada komerčně významných proteinů je tvořena více podjednotkami:

heterodimery: human thyroid-stimulating hormone,

tetramery: hemoglobin, protilátky


Příprava proteinů tvořených podjednotkami:

1. klonování genů pro podjednotky samostatně a pak jejich spojení ***in vitro*** – nízká účinnost
2. klonování genů ve dvou vektorech v jedné buňce – sestavení proteinu ***in vivo*** – vysoká účinnost


Možné komplikace:

- Ztráta jednoho z vektorů, aktivní protein se nevytvoří
 - Různý počet kopií vektorů, jedna z podjednotek je v nadbytku, výsledného produktu je málo
3. Klonování genů v bicistronickém expresním vektoru


Dvouvektorový expresní systém

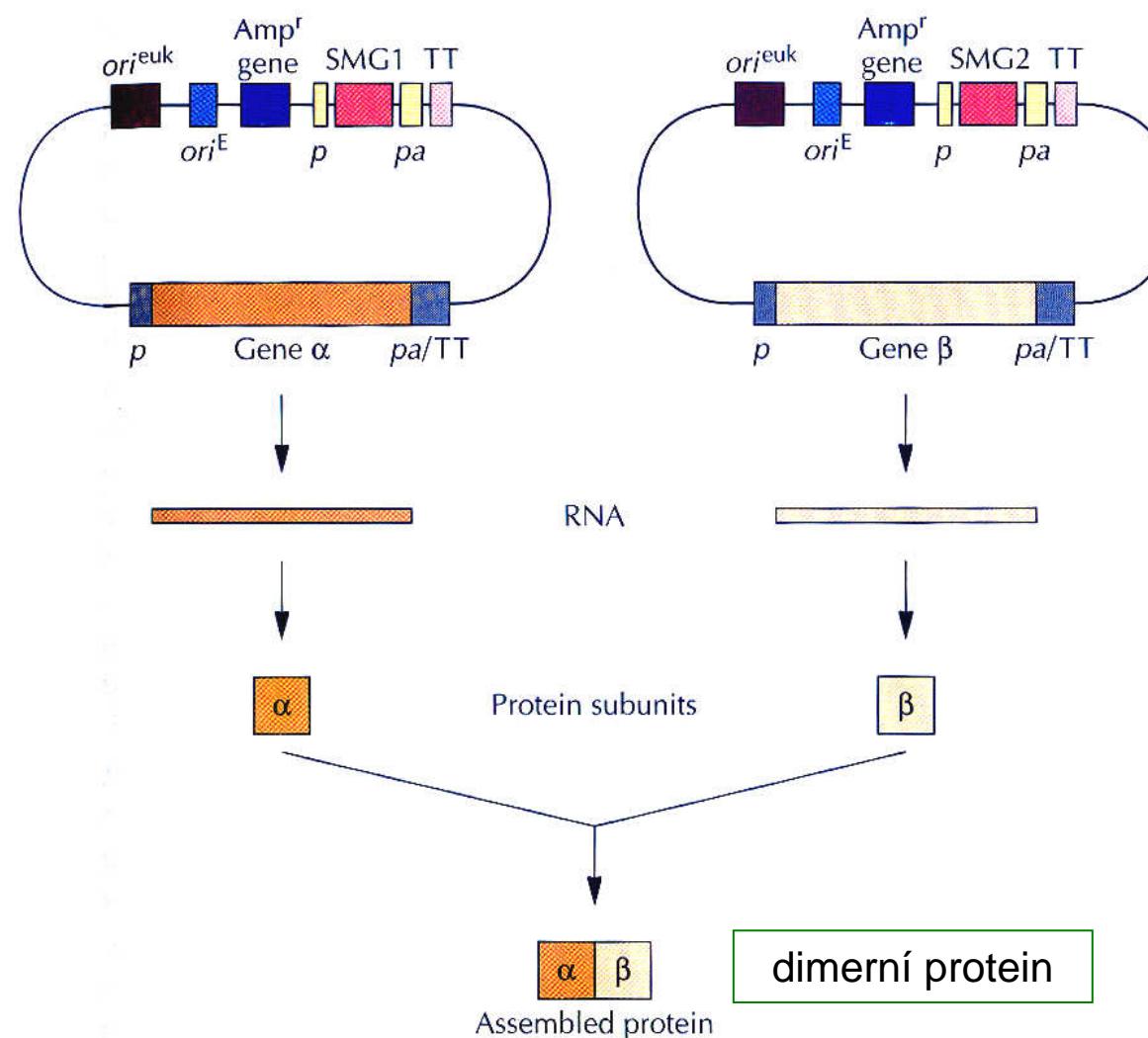


Expresní vektor se dvěma klonovanými geny kódujícími podjednotky heterodimeru

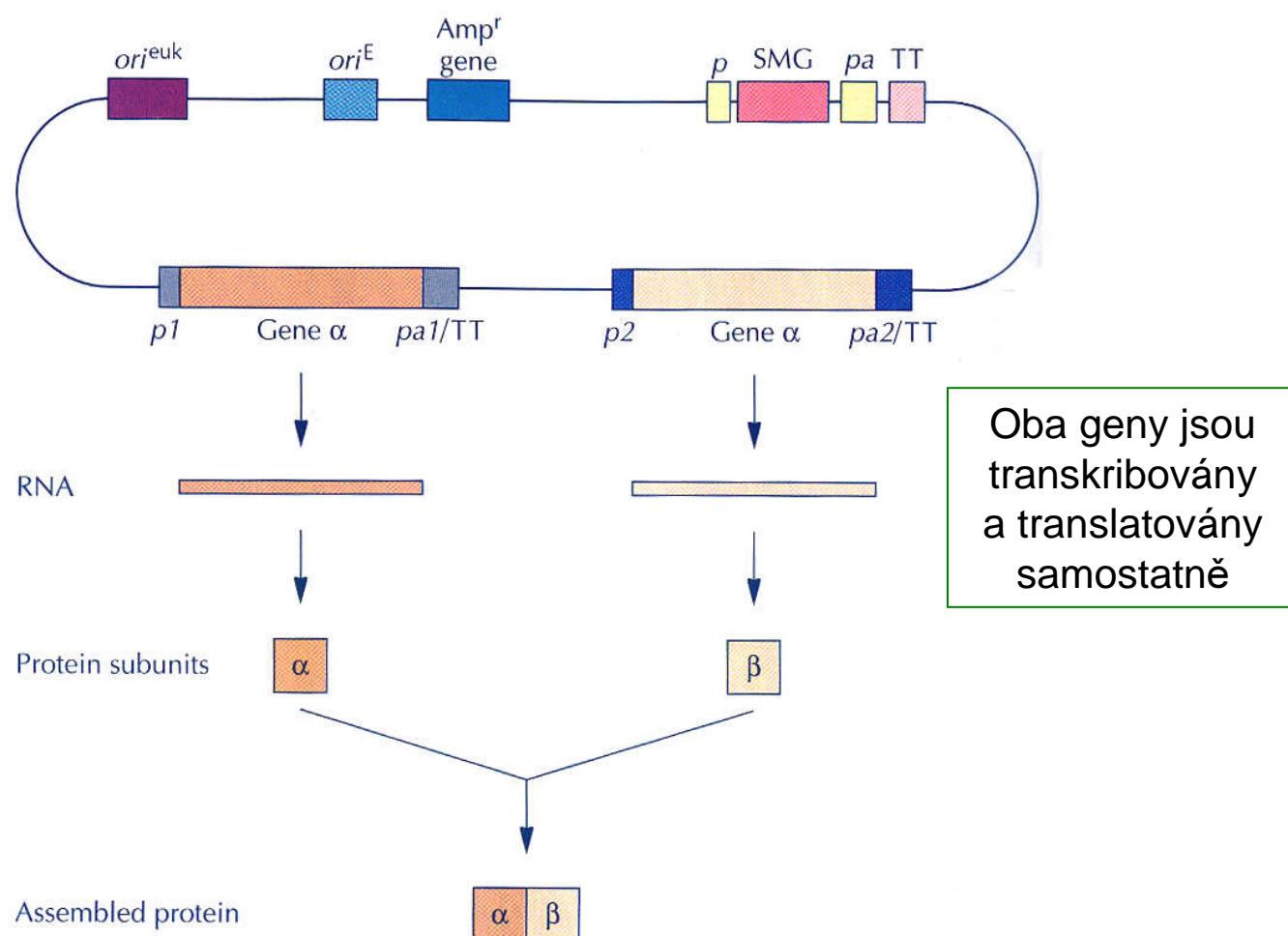

Bicistronický expresní vektor pro klonování genů kódujících podjednotky heterodimeru

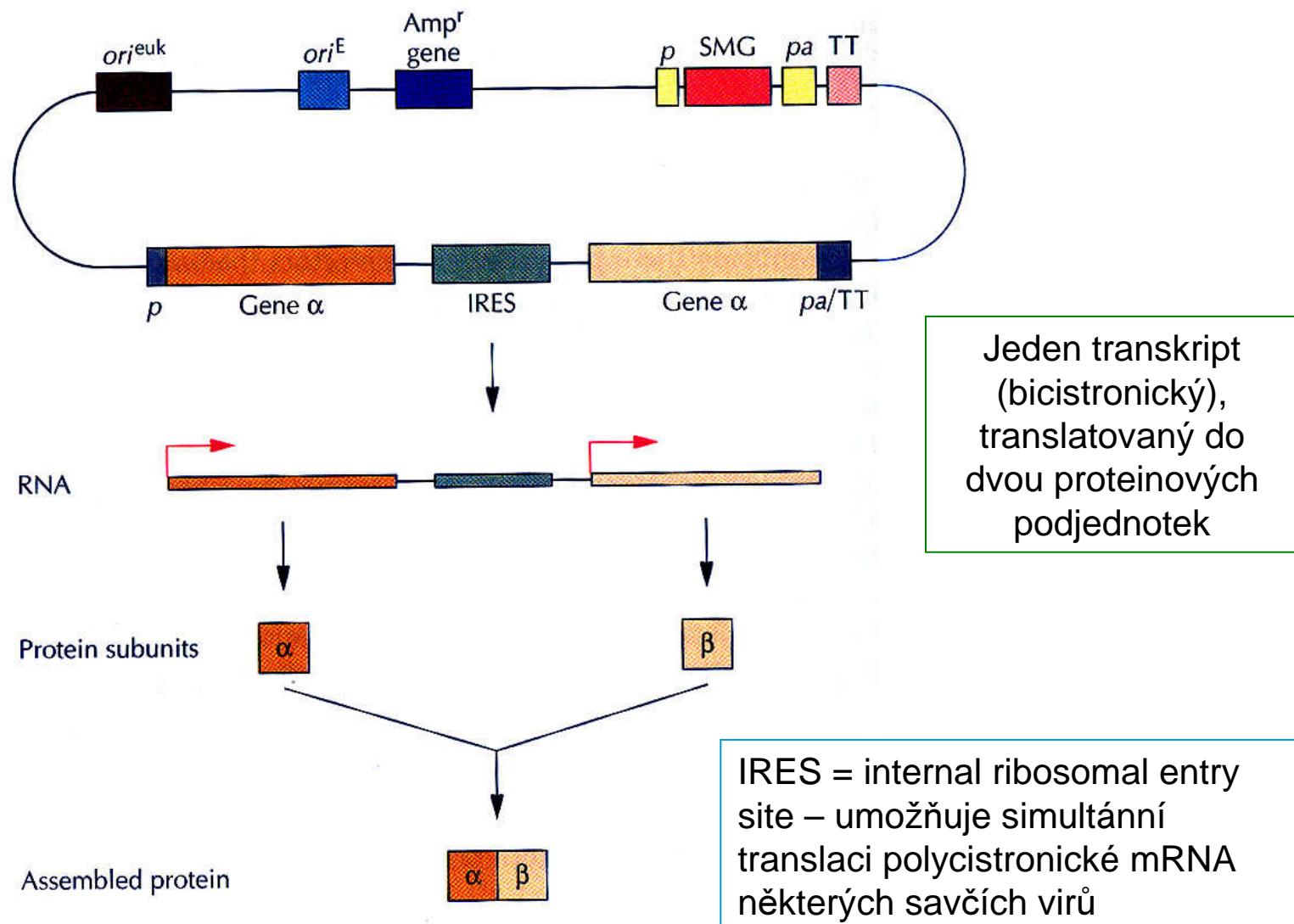

Důkaz začlenění genu pro lidský B-globin homologní rekombinací – extenzívní postup

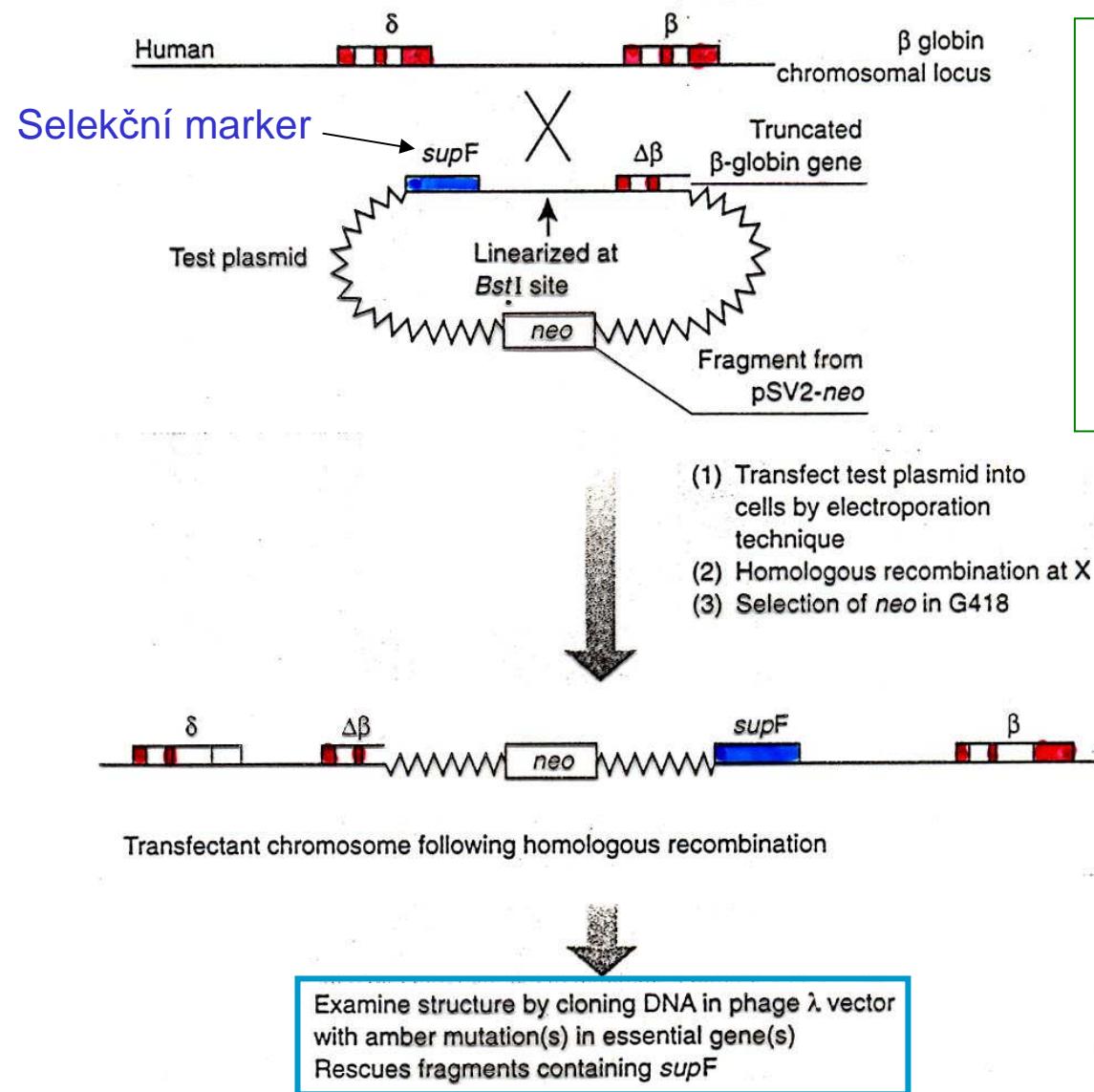


Přenos testovacího plazmidu do somatických buněk v tkáňové kultuře s cílem detektovat vzácné buňky, v nichž došlo k homologní rekombinaci (1xCO) – ta probíhá s frekvencí 100-1000x nižší než náhodné začlenění

Dochází k duplikaci sekvencí, ne záměně alel


Examine structure by cloning DNA in phage λ vector with amber mutation(s) in essential gene(s)
Rescues fragments containing *supF*

Sledování způsobu začlenění cizího genu pomocí PCR (bez použití selektovatelného markeru) (vnášený gen je přerušen inzercí – stačí několik nukleotidů)

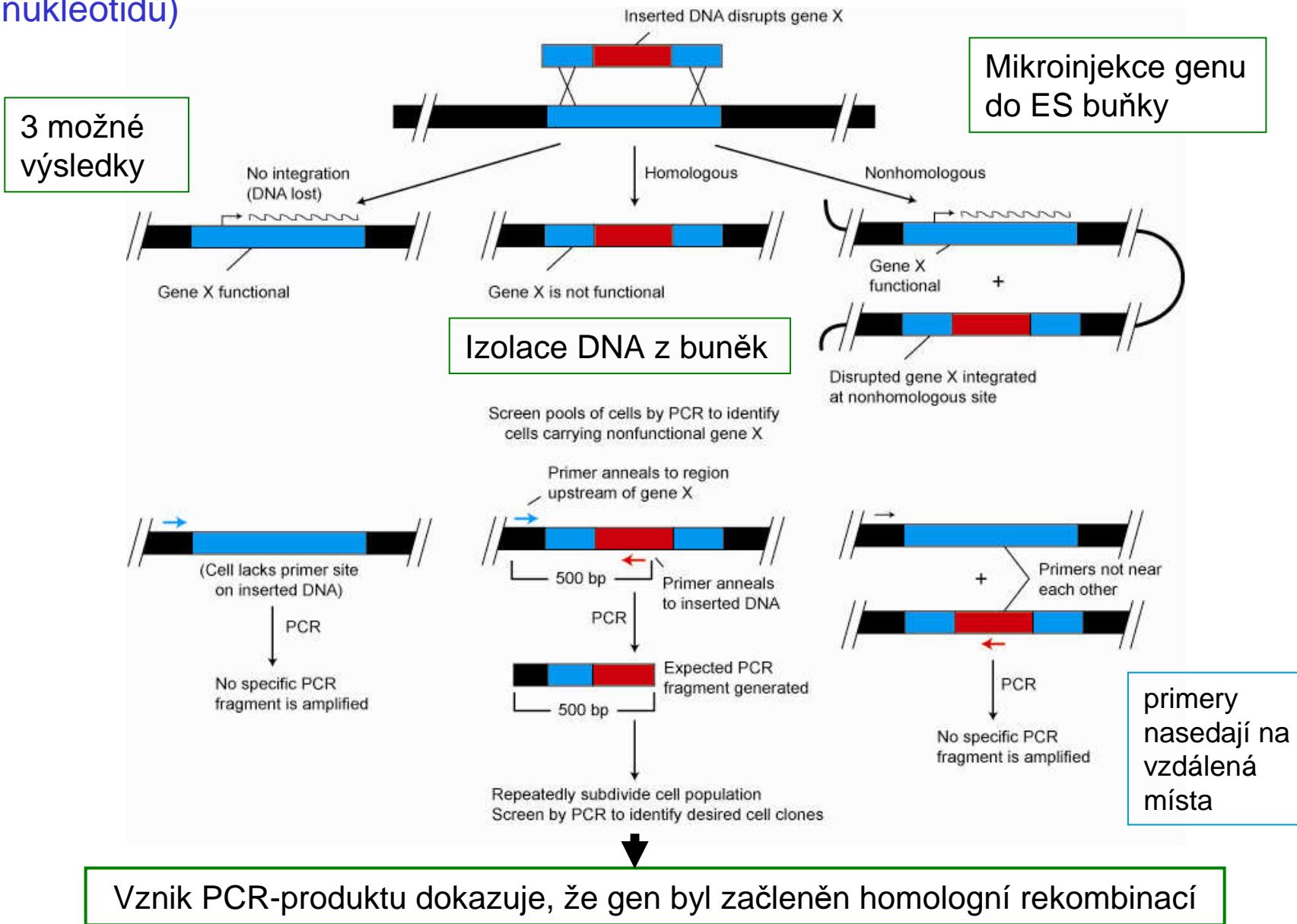

Selekce transfektant (ES buněk), v nichž došlo k začlenění vneseného genu homologní rekombinací (gene knockout)

PNS vektor

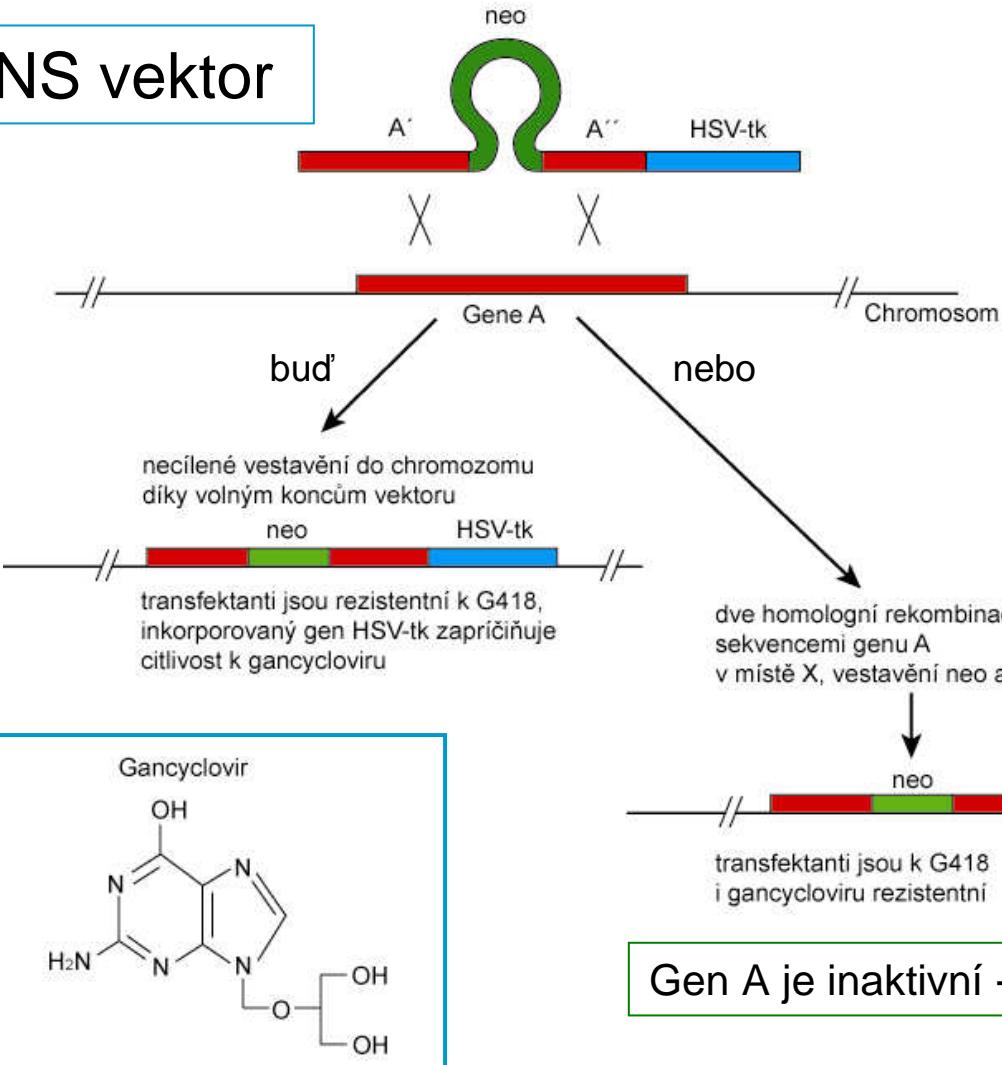

Substituční vektor pro gen A, který je přerušen genem neo a obsahuje HSV-tk

Pozitivní selekce = G418

Negativní selekce = HSV-tk




2000x obohacení o buňky obsahující přerušený gen A


Gen A je inaktivní - vznik nulové mutace

HSV-tk = fosforyluje gancyclovir na monofosfát, který je pak buňkou přeměněn na trifosfát – ten inhibuje DNA-polymerázu a proliferující buňky jsou usmrcovány

Náhrada alel v ES buňkách homologní rekombinací

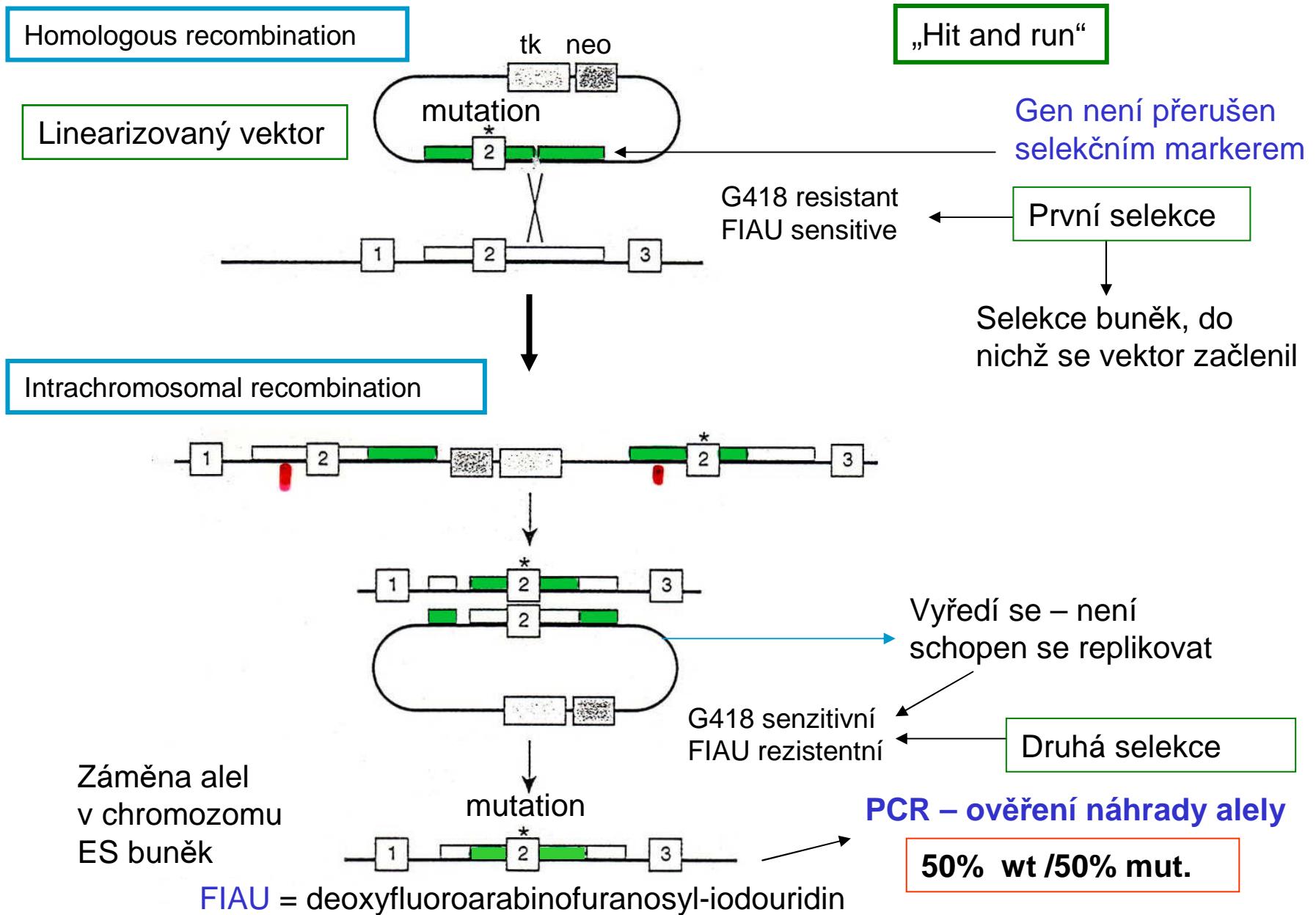

Dosažení vysokého stupně exprese koamplifikací klonovaného genu spolu s genem DHFR

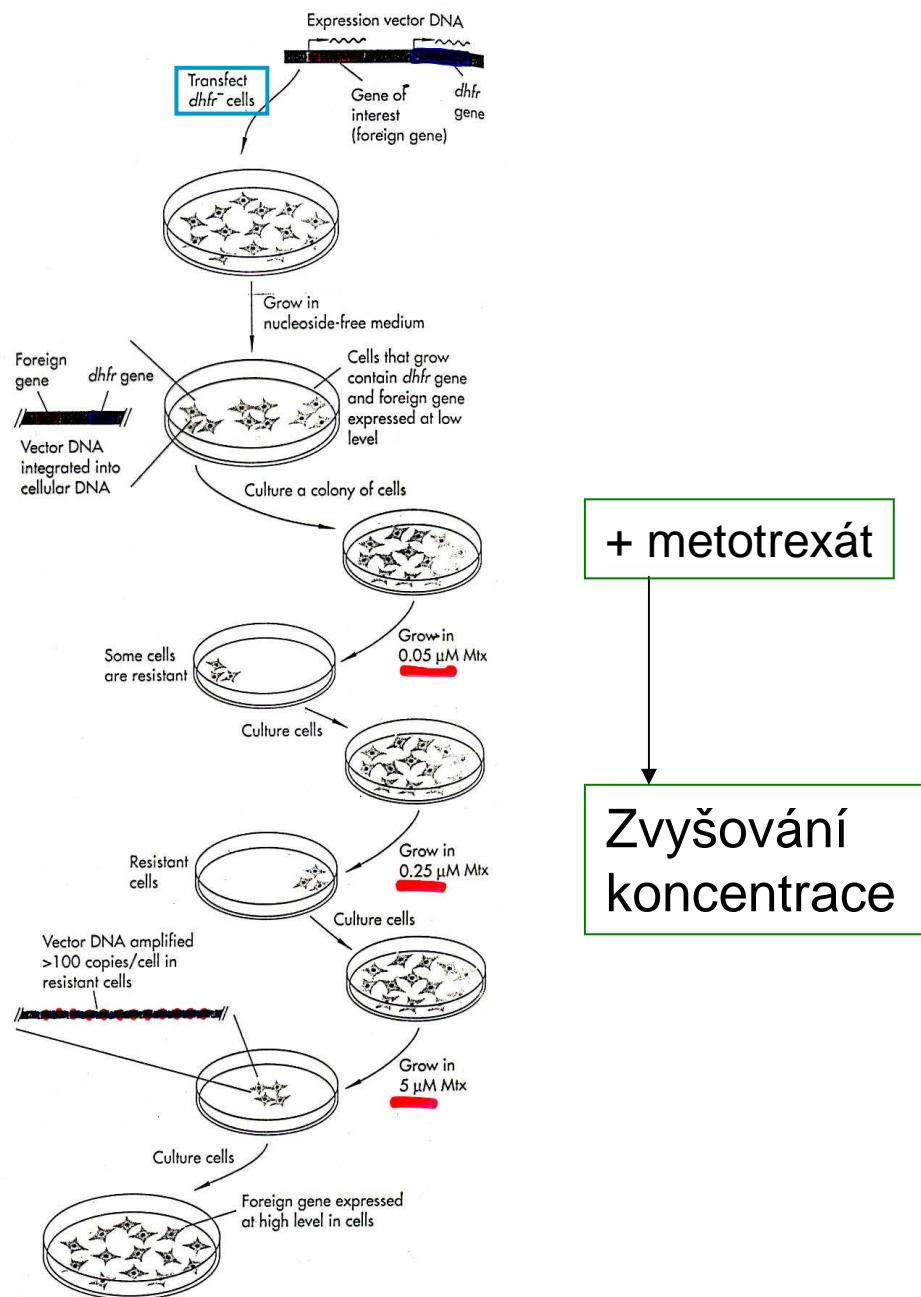

SV40

genom = 5,2 kb kružnicová dsDNA


životní cyklus:

1. V permisivních buňkách (šimpanz) – lytický cyklus
2. V nepermisivních buňkách (myš, křeček) – integrace do genomu, přeskupení, transformace buněk

časná oblast = T antigen – replikace, transkripce


pozdní oblast = proteiny kapsidu (VP1-VP3)

Konstrukce vektorů: náhrada časné nebo pozdní oblasti cizími geny, komplementace chybějících funkcí pomocným virem nebo pomocnými buňkami (COS)

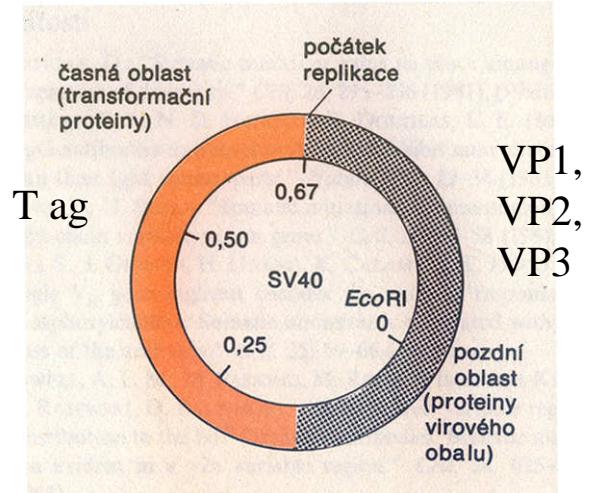

Vektory s nahrazenou pozdní oblastí



Využití: Studium genové exprese, regulace, posttranskripčních úprav atp, tvorba proteinů

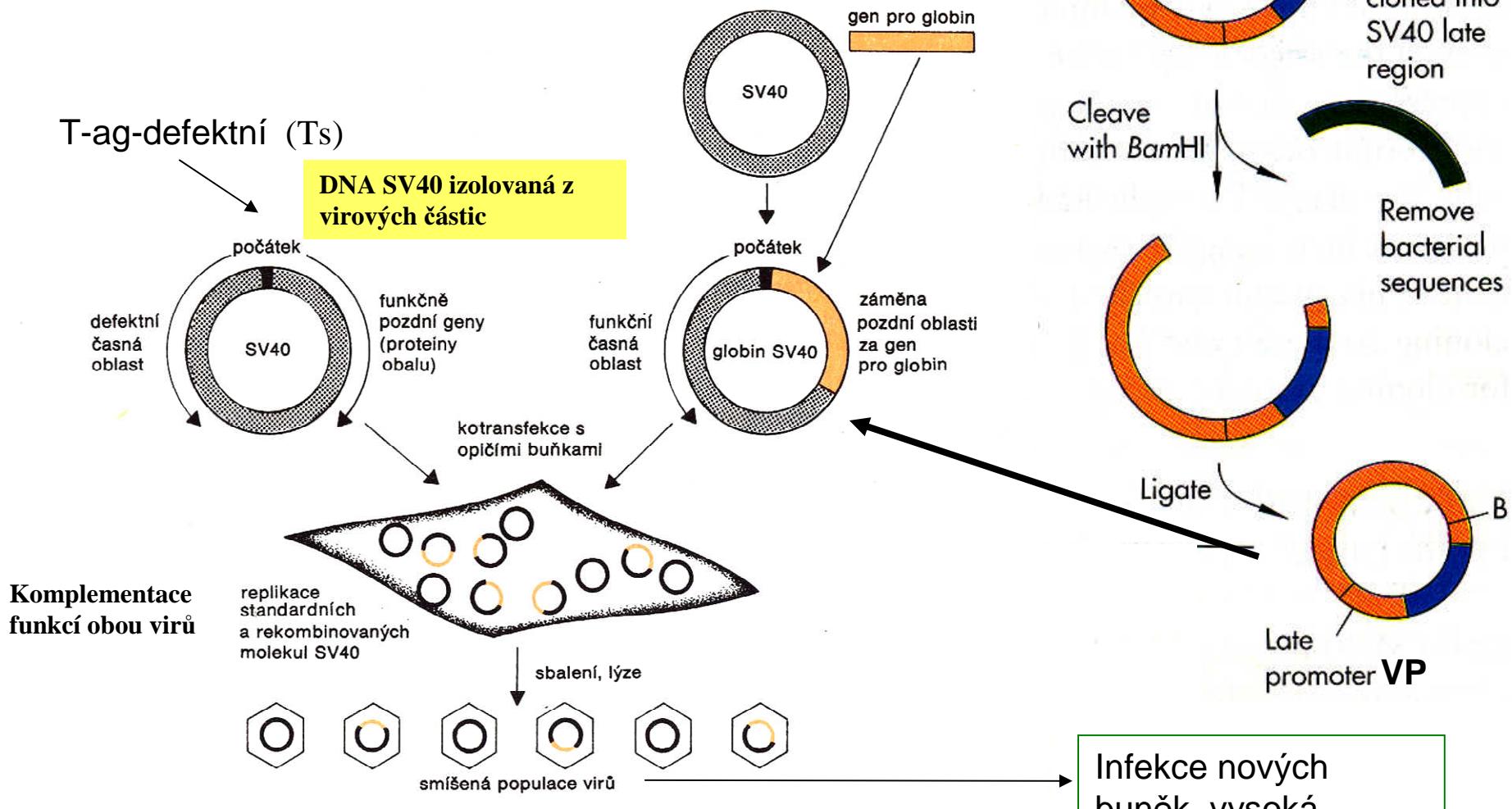


Obr. 15-1: Pozdní oblast SV40 je zaměněna klonovaným genem pro globin. Hybrid je pak použit k transformaci opíčích buněk současně s SV40-DNA mutovanou v časně oblasti. Časně funkce SV40 poskytuje globin-SV40 hybridní molekula a spoluinfikující pomocný vírus produkuje proteiny obalu viru. Výsledkem je pak smíšený soubor virů skládající se buď z virionů se sbalenou SV40-DNA defektní v časně oblasti, nebo hybridní globin-SV40 DNA.

Infekce nových buněk, vysoká produkce proteinu

Příprava COS buněk
CV-1 Origin of SV40

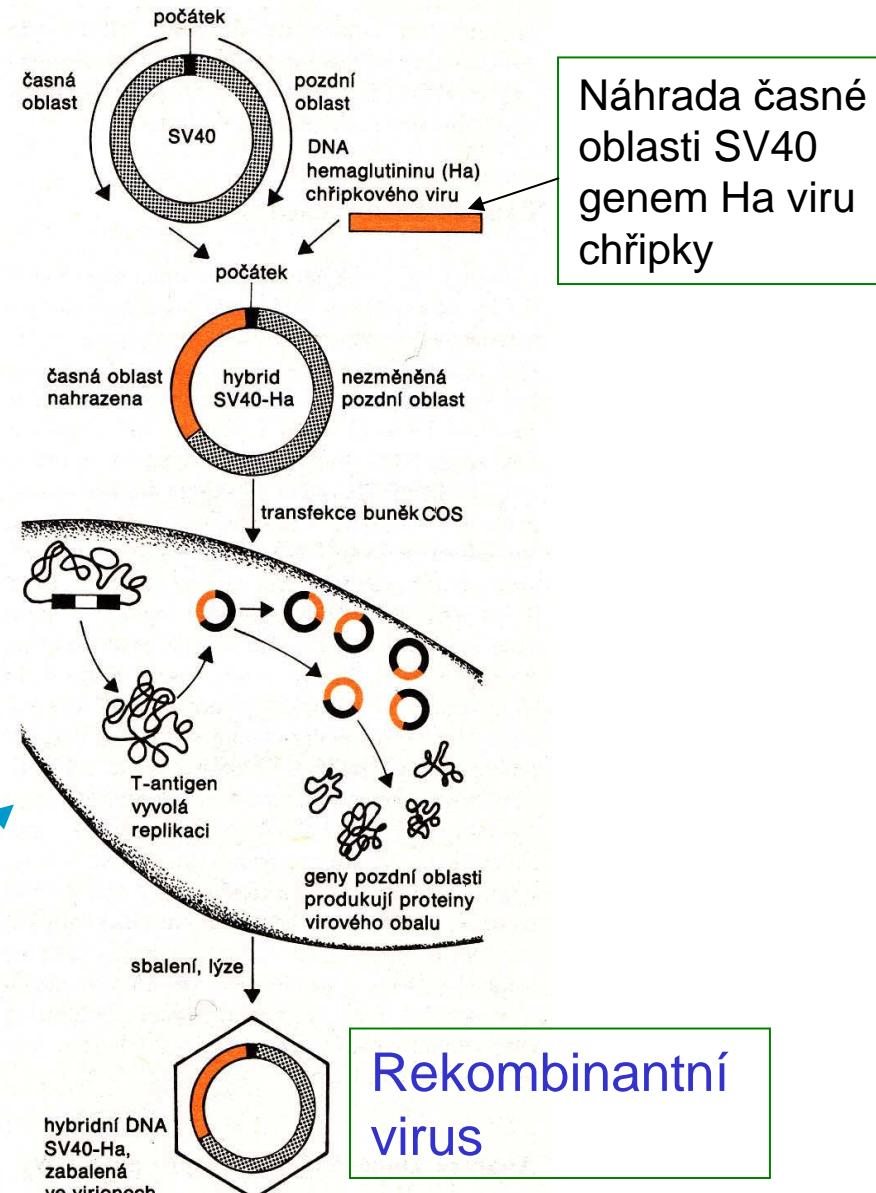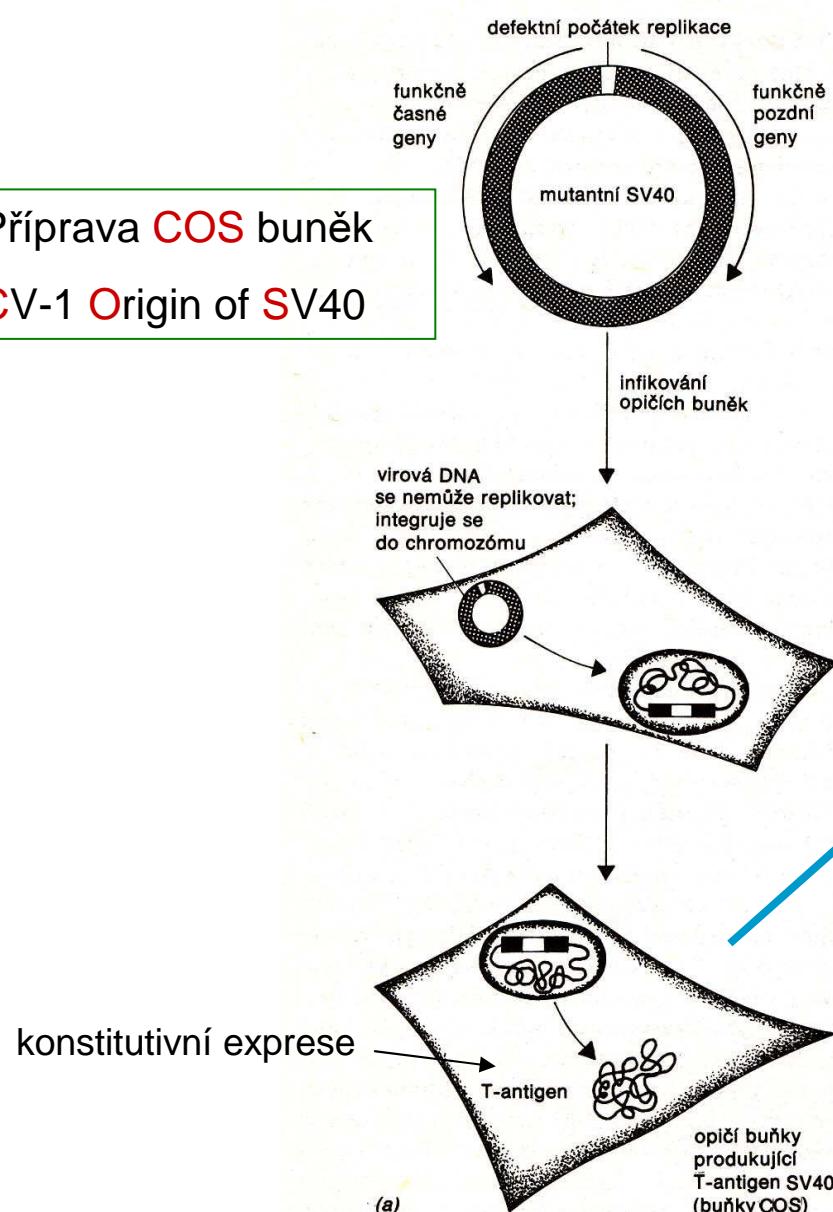

Obr. 15-2: Zámena časné oblasti SV40. (a) Opičí buňky jsou infikovány mutovaným SV40, bez funkčního počátku replikace, ale s funkčními časnými i pozdními geny. Protože se takové molekuly nemohou replikovat, integrují se do chromozómu opičích buněk, kde pokračují v tvorbě funkčního T-antigenu. Tyto buňky se nazávají COS. (b) Časná oblast SV40 je nahražena klonovaným genem pro hemagglutinin (*Ha*) chřipkového viru. Při transfekci COS buněk takto vytvořeným hybridem se v buňkách tvoří T-antigen, který vyvolává replikaci Ha-SV40 DNA. Funkční pozdní oblast tvoří proteiny virového obalu. Molekuly Ha-SV40 jsou sbalené do virionů.

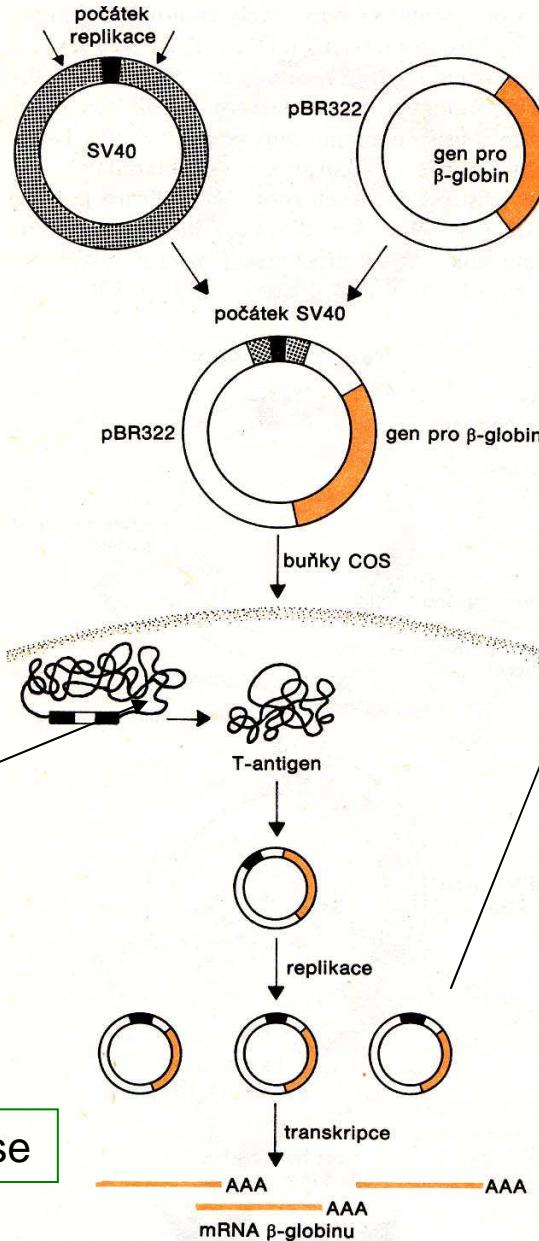

Indukce exprese (replikace) klonovaných genů regulací exprese genu pro T antigen (časný promotor):

- Tag (ts)
- Tag pod kontrolou jiného promotoru (metalothionein)


transientní exprese

Expresní kyadlové vektory na bázi plazmidů
(obsahují oriSV40)

Rekombinantní molekuly se neobalují – **velká klonovací kapacita**


Při transfekci buněk COS se cizí geny replikují ve velkém počtu kopií, pokud jsou klonovány v plazmidu s SV40 počátkem. Velký počet kopií dovoluje účinnou transkripci cizího genu.

Konstrukce infekčních rekombinanterních virů vakcínie exprimujících HBsAg viru chřipky

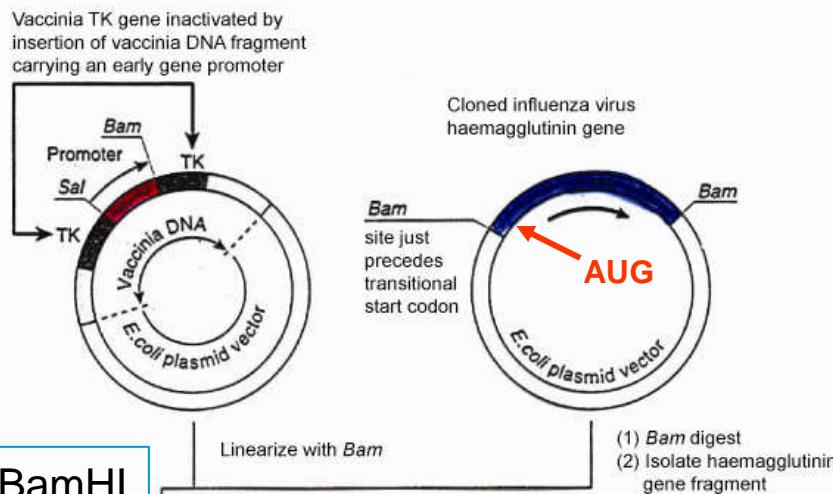

Klonování do BamHI

Klonovaný gen pro HBsAg určený k expresi (konstrukt připravený v E. coli)

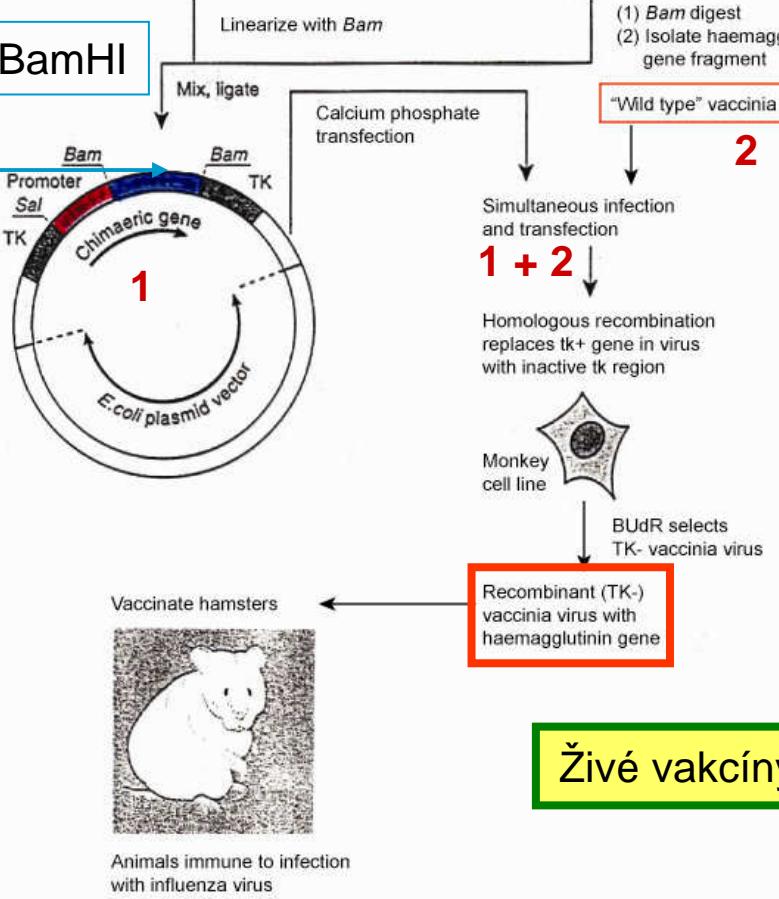

Živé vakcíny


Virus vakcínie

- 187 kb
- izolovaná virová DNA je neinfekční
- replikace a transkripcie DNA v cytoplazmě
- vnášení cizích genů homologní rekombinací ***in vivo***

Env viru HIV a HTLV-III
Sag viru hepatitidy B
Ag viru vztekliny

Začleňování cizích genů do DNA viru vakcinie homologní rekombinací

+ selekční marker (neoR) navíc
- vzhledem ke spontánním mutacím
 $Tk^+ \rightarrow Tk^-$

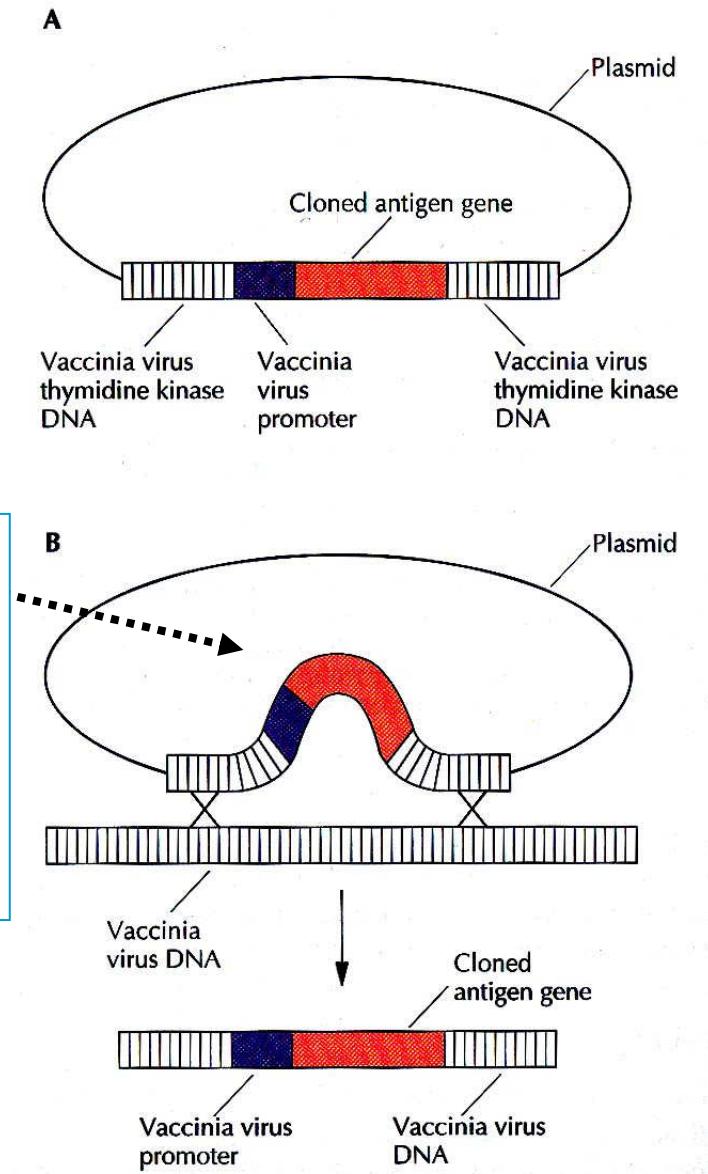

Gen kódující antigen je začleněn za promotor genu viru vakcinie a vložen do plazmidového vektoru tak, že přerušuje sekvenci neesenciálního genu viru vakcinie (např. gen pro Tk)


Tento plazmid se přenese transformací do živočišných buněk Tk- pěstovaných v kultuře (kuřecí embryonální fibroblasty), které byly předtím infikovány virem vakcinie standardního typu, který tvoří funkční Tk.

Homologní rekombinací dojde k začlenění genu pro antigen do genu Tk viru vakcinie. V buňce pak není žádný funkční gen pro Tk – buňky lze selektovat v prostředí s BU.

Konečná selekce se provede hybridizací pomocí sondy specifické pro cizí gen.

Systém pro snadnou selekci rekombinantních virů vakcinnie

(nevýžaduje selekční látku, není nutné přerušit žádný virový gen)

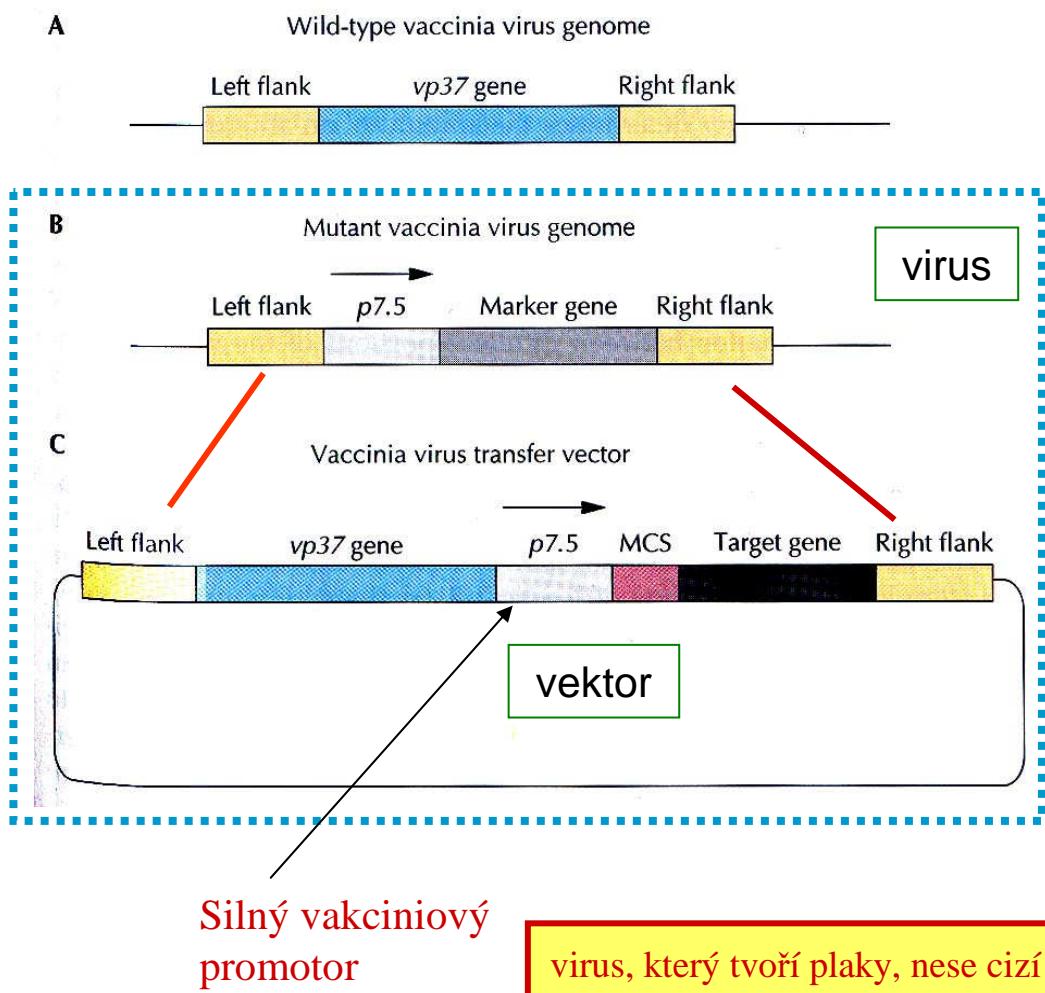


- A. Úsek genomu viru obsahující gen vp37, který je zodpovědný za tvorbu plak na monovrstvě buněk *in vitro*
- B. Úsek genomu mutantního viru, v němž byl gen vp37 nahrazen markerovým genem z *E. coli* pod kontrolou silného virového promotoru (p7.5). Tento virus netvoří plaky, neboť neobsahuje vp37
- C. Vektor obsahující MCS, do něhož se vloží gen zájmu. Homologní rekombinace mezi hraničními sekvencemi (flank) na vektoru a na genomové DNA mutantního viru vede k současnemu začlenění genu vp37 a genu zájmu. **Virus tvoří plaky = selekce**

Vektorový systém odvozený od viru vakcinie

- široké rozmezí hostitelů

Buňky z pacienta s CF – defekt v transportu iontů

V buňkách se tvoří T7-RNA-polymeráza

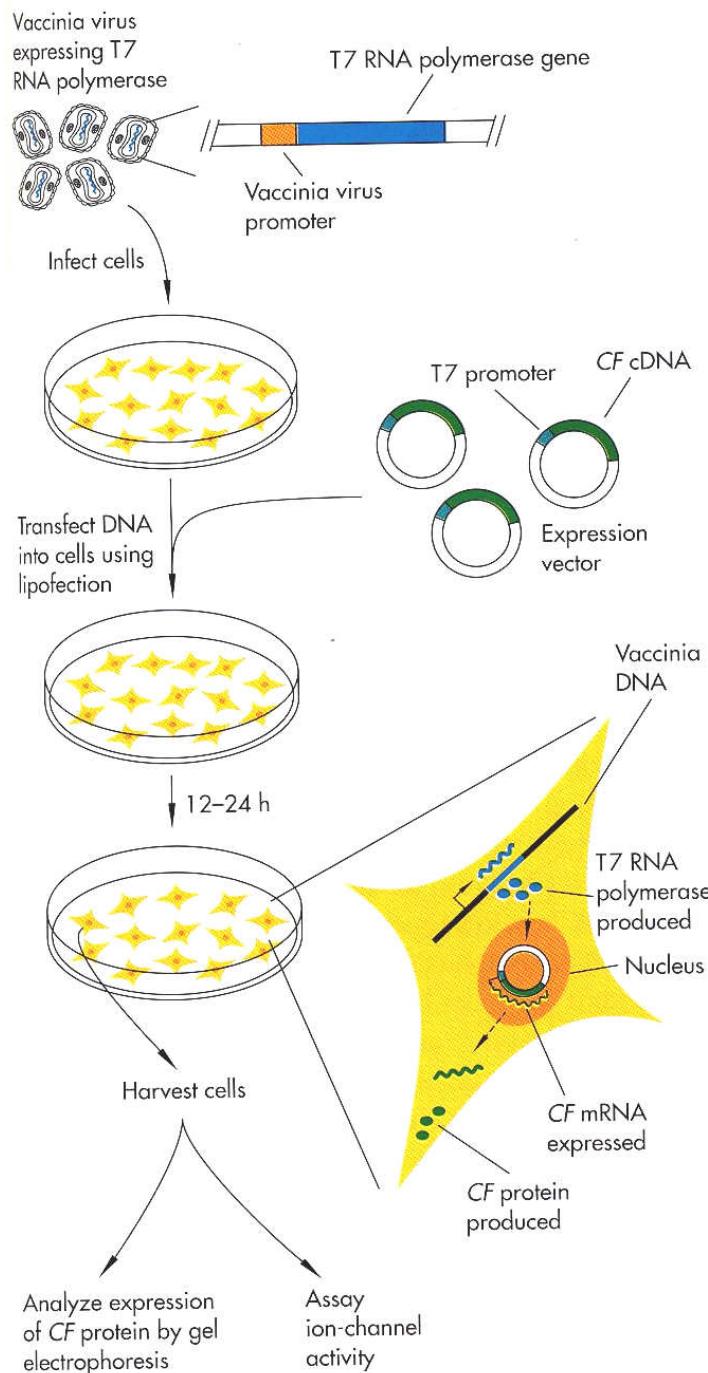

1. Infekce buněk virem vakcinie produkujícím T7-RNA-polymerázu
2. Infekce vektorem s klonovaným genem /CF/ pod kontrolou T7-promotoru

Virus zastavuje syntézu proteinů hostitelské buňky, až 30% mRNA v buňce tvoří CF-mRNA, která je preferenčně translatována

Používání a výhody vakcina víru


- je možné vakcinovat proti několika infekcím současně – do vektoru se umístí geny pro různé antigeny pod kontrolou různých vakciniových nebo jiných virových promotorů (aby nedocházelo k homologní rekombinaci a ztrátě genů), a výběrem promotorů lze časovat expresi genů (časné x pozdní).

Živá vakcína má tyto výhody oproti usmrceným virům nebo podjednotkovým vakcínám:


- virus exprimuje autentický antigen způsobem, který se podobá přirozenému
- virus se replikuje, antigenu přibývá, aktivují se B a T buňky.

Již klonované antigeny: vzteklina, hepatitis B, chřipka, HSV, virus stomatitidy.

Klonování genů ve vektorech odvozených z bakulovirů

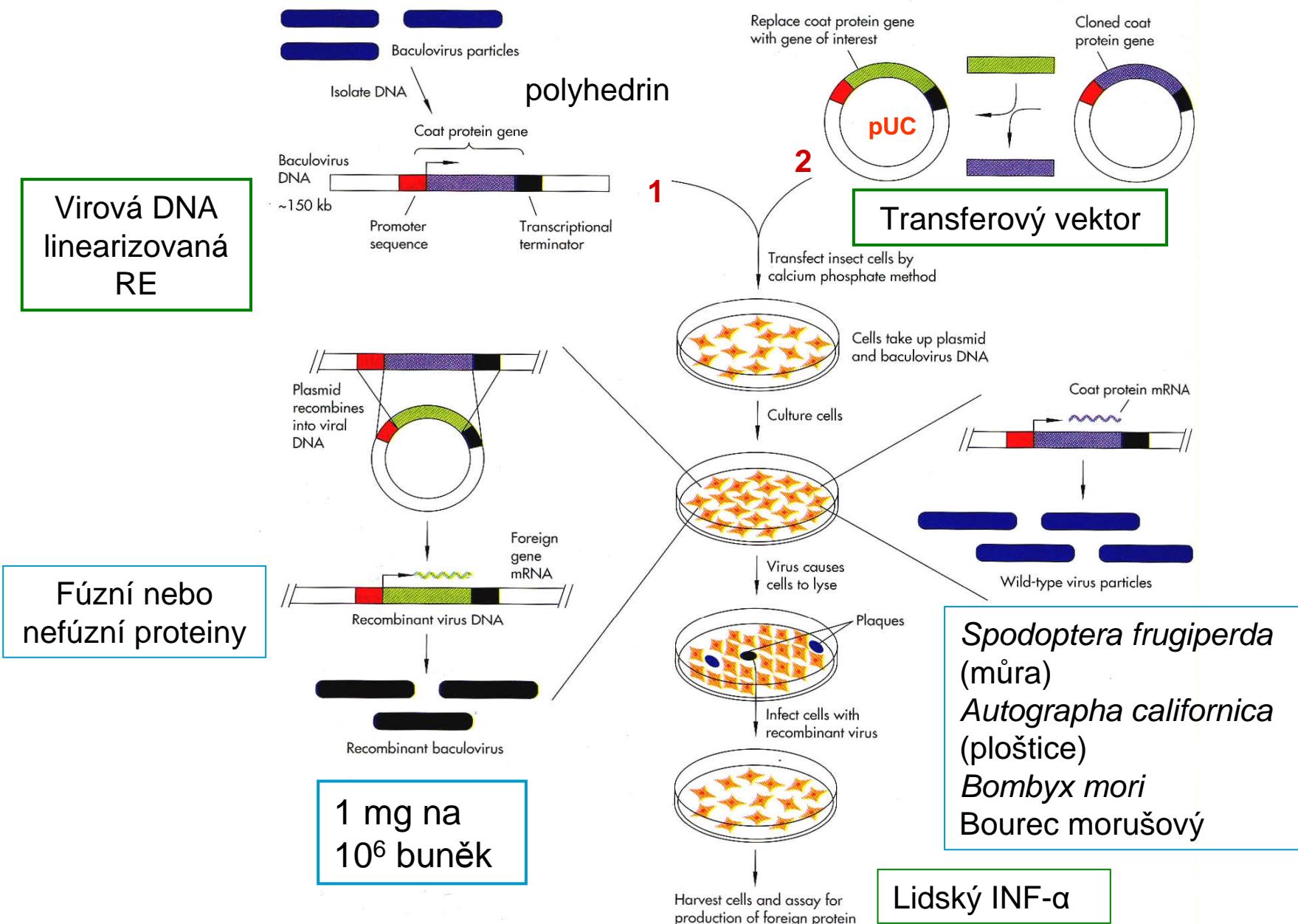

Příprava rekombinantních bakulovirů

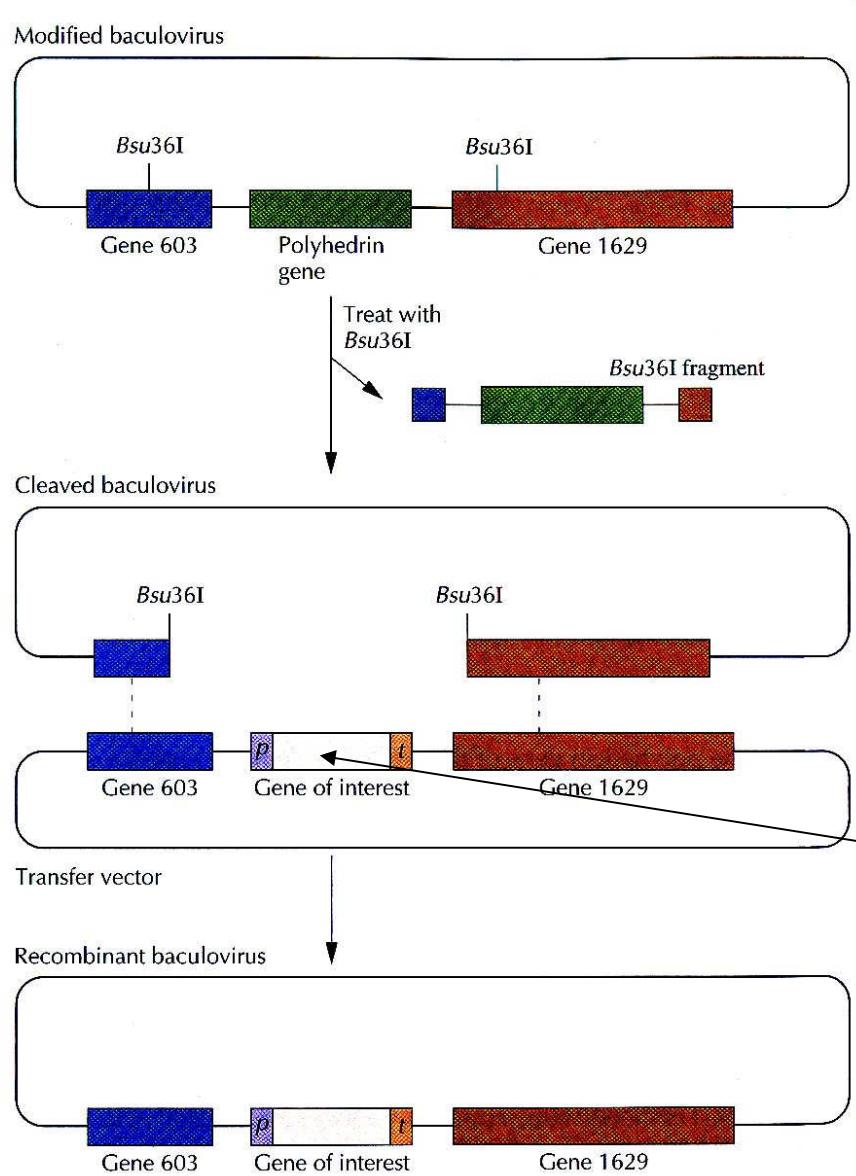

Do genů **603** a **1629** (který je nutný pro replikaci viru, geny ohraňují gen pro polyhedrin), se vnesou místa pro RE **Bsu36I**. Působením **Bsu36I** se vyštěpí segment s genem pro polyhedrin a DNA bakuloviru se vnese spolu s transferovým vektorem do hmyzí buňky, kde dojde k homologní rekombinaci za vzniku rekombinantního bakuloviru s funkčním genem **1629**.

***p a t* z genu pro polyhedrin**

Většina potomstva bakulovirů je rekombinantní.

Spodoptera frugiperda



Insecta: Lepidoptera: Noctuidae
(Subfamily Amphiptyrinae, Tribe Amphiptyrini)

Some of the recombinant proteins that have been produced by the baculovirus expression vector system. HIV-1, human immunodeficiency virus type 1; HSV, herpes simplex virus.

a-Interferon	G-protein-coupled receptors	Malaria proteins
Adenosine deaminase	HIV-1 envelope protein	Mouse monoclonal antibodies
Anthrax antigen	HSV capsid proteins	Multidrug transporter protein
β-Amyloid precursor protein	Human alkaline phosphatase	Poliovirus proteins
β-Interferon	Human DNA polymerase α	Pseudorabies virus glycoprotein 50
Bovine rhodopsin	Human pancreatic lipase	Rabies virus glycoprotein
Bluetongue virus neutralization antigen	Influenza virus hemagglutinin	Respiratory syncytial virus antigen
Cystic fibrosis transmembrane conductance regulator	Interleukin-2	Simian rotavirus capsid antigen
Dengue virus type 1 antigen	Lassa virus protein	Tissue plasminogen activator
Erythropoietin		


Alternativní způsob přípravy rekombinantních bakulovirových vektorů

- Expresní kazeta se vloží místně-specifickou transpozicí do bakulovirového kyvadlového vektoru (bacmidu). Bacmid, který se replikuje v *E. coli* jako velký plazmid, obsahuje úplný genom bakuloviru, nízkokopiový počátek replikace z F plazmidu a att místa pro transpozon T7.
- Rekombinantní bacmid se připraví transpozicí modifikovaného transpozoru T7 z donorového plazmidu, který obsahuje cílový gen určený k expresi, do att míst na bacmidu (je vyžadován pomocný plazmid kódující transponázu).
- Rekombinantní bacmid je pak izolován z *E. coli* a přenesen transfekcí do hmyzích buněk.

Konstrukce rekombinantního bacmidu


A *Autographa californica multiple nuclear polyhedrosis virus*

AcMNPV genome

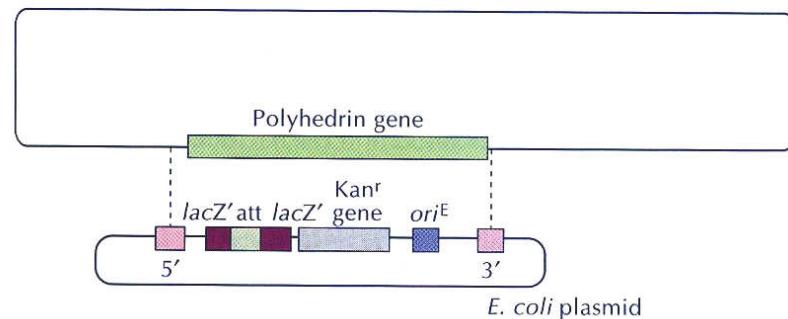


B

Bacmid

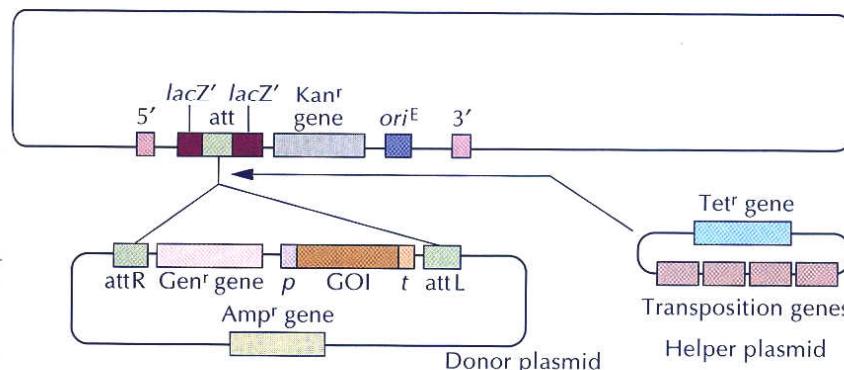

C

Recombinant bacmid

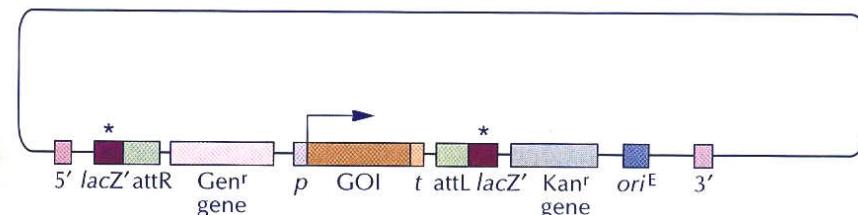

Začleněním plazmidu do genomu bakuloviru (2xCO) vzniká kyvadlový vektor

Transpoziční funkce pomocného plazmidu umožní transpozici úseku donorového plazmidu obsahujícího gen zájmu, který je pod kontrolou bakulovirového promotoru a terminátoru (*p* a *t*).

Rekombinantní bacmid má přerušený gen *lacZ'*. Hmyzí buňky, do nichž byl přenesen rekombinantní bacmid, nejsou schopny tvořit funkční B-galaktozidázu.

Retroviry a retrovirové vektory

1. Infikují široké spektrum buněk živočišných druhů a různé typy lidských buněk
2. Infekce vede k integraci virového genomu do genomu hostitelské buňky – místo integrace je libovolné (přednostně v transkripčně aktivním chromatinu)
3. Infekce retrovirem nemá za následek smrt buňky, často vede ke stálé produkci nových virionů
4. Retroviry nesoucí onkogeny lze využít k infekci buněk různých tkání, čímž lze získat permanentně transformované buněčné linie – **onkogenní retroviry = přirozené vektory**
5. Nevýhodou je schopnost retrovirových vektorů aktivovat transkripci genů sousedících s místy jejich začlenění

Životní cyklus retrovírů

- Virová RNA vstupující do buňky je doprovázena RT a integrázou, zabalenou do virionu
RT spolu s RNázaH aktivitou přepíše RNA do cDNA, pak do dsDNA. Tato kopie DNA, zvaná provirová DNA, je mírně delší než RNA díky duplikacím koncových sekvencí během procesu konverze RNA na DNA
- Provirová DNA se cirkularizuje a pomocí integrázy se inzertuje do genomu. Do genomu se obvykle integruje jen jedna nebo málo kopií, místa integrace jsou náhodná (preferenčně do transkribujících se oblastí)
- V LTR sekvenci je silný promotor pro RNA polymerázu II
- Provirový genom má tři geny: gag, pol, env, které jsou transkribovány a translatovány do prekurzorových proteinů, které jsou proteolyticky štěpeny za vzniku zralých proteinů.
- Transkripty plné délky se zabalují do částic viru. Důležité je místo psi – pro interakci virové RNA s proteiny, sestavení virionů probíhá v buněčné membráně, viry pučí z buněk, nedochází k lyzi buněk

Vektory odvozené od retrovírů


Výhody:

- vysoká účinnost přenosu genů
- dobře prostudovaný systém
- klonovací kapacita až 8 kb (i více)
- integrace vektoru do genomu, stabilní začlenění genu a jeho permanentní exprese


Nevýhody:

- infikuje jen dělící se buňky (výhoda v GT)
- nízké titry rekombinantního vektoru
- náhodná integrace do genomu – inaktivace/aktivace endogenů
- účinnost přenosu viru do buněk *in vivo* je nízká

Příklady retrovírých vektorů

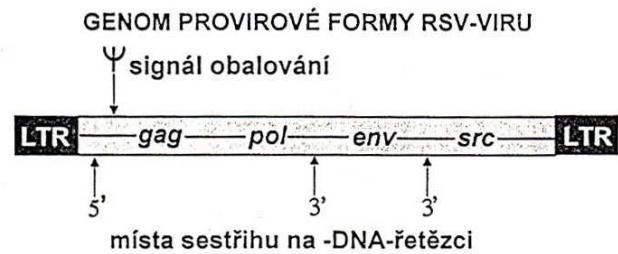


Replikace, transkripce

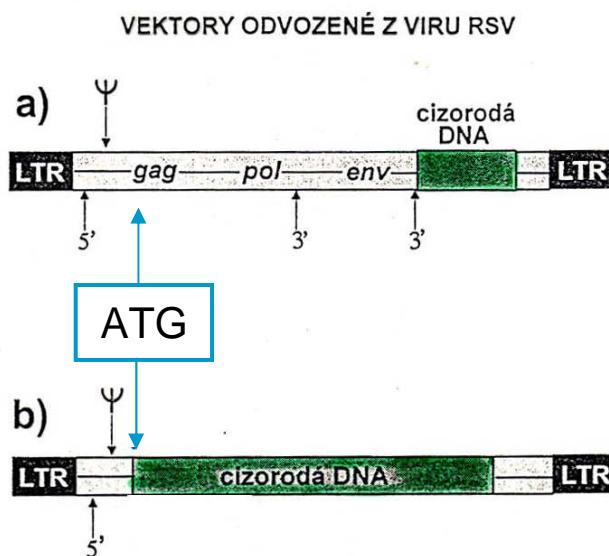


Sekvence *in cis* nezbytné pro transkripci, replikaci a obalování:

- **LTR**: integrace DNA do genomu, transkripce
- **PBS**: reverzní transkripce,
- **ψ (psi) místo**: obalování

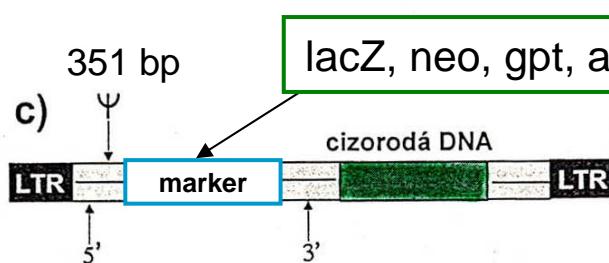

Defektní virový genom = nová transkripční jednotka v genomu hostitelské buňky


Transfekce rekombinantním retrovirovým vektorem do buněk produkujících viriony pomocného viru

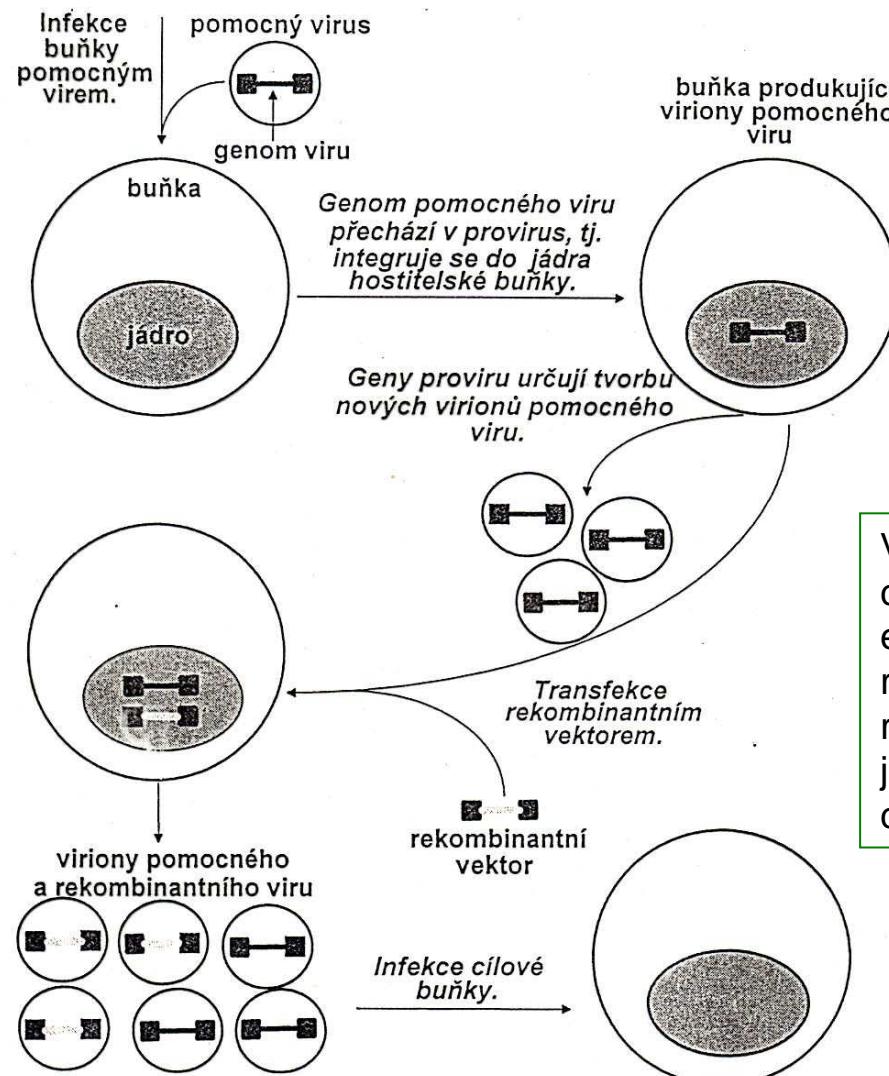


Molekuly RNA vzniklé transkripcí DNA integrovaného rekombinantního vektoru a proviru pomocného viru se obalí proteiny, které jsou kódovány tímto provirem. Tvoří se viriony pomocného a rekombinantního viru.

V úspěšně infikovaných cílových buňkách se exprimují geny rekombinantního retrovíru. Oba typy virů jsou produkovány cílovými buňkami.

Schéma přípravy linie pomocných buněk Ψ 2

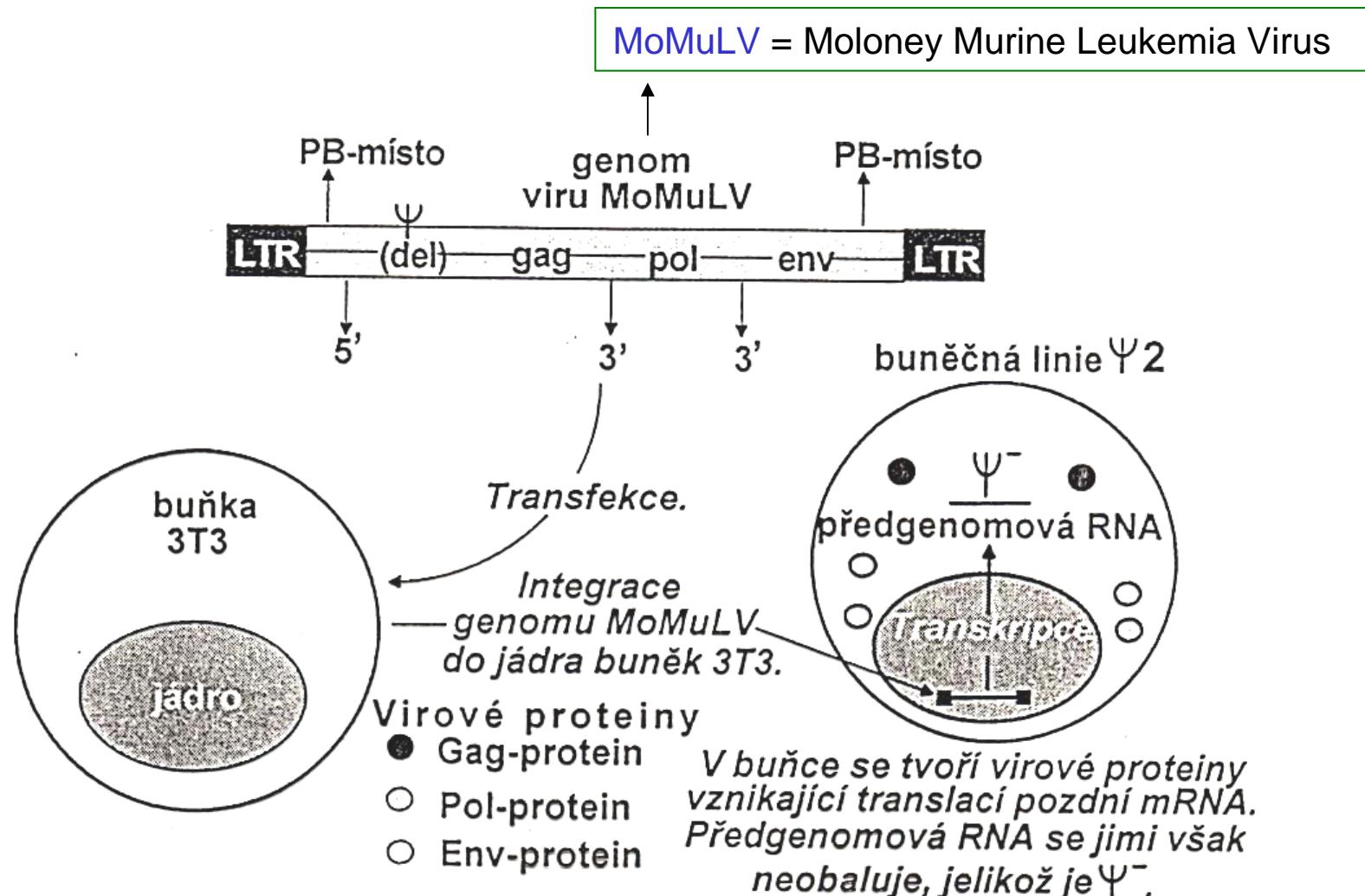


Příprava čisté linie rekombinantních retrovírusů

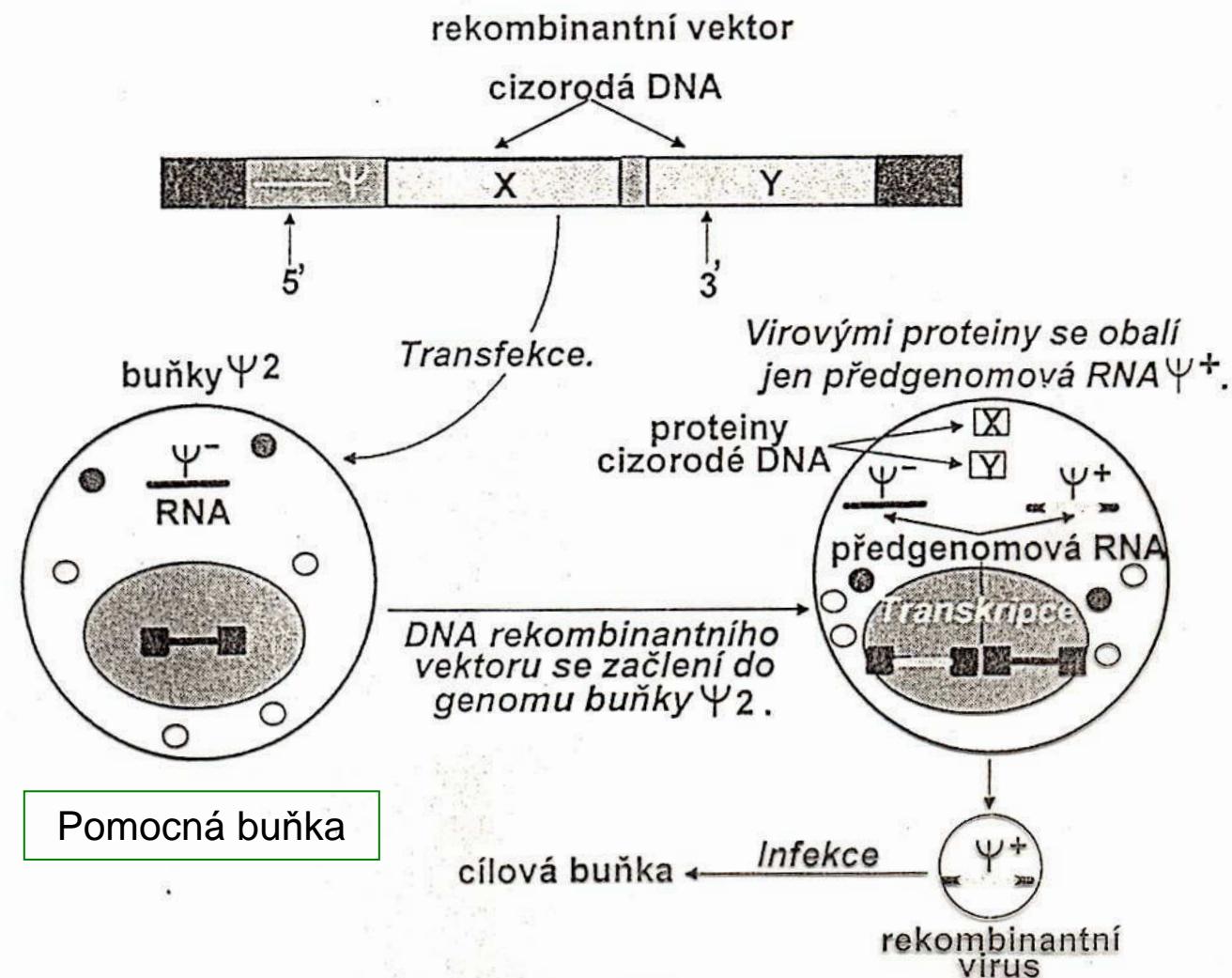

Využití retrovirových vektorů pro stabilní expresi cizorodých genů

Rozmezí hostitele – pseudotyp viru
amfotropní MuLV – široké rozmezí hostitele, včetně lidských buněk

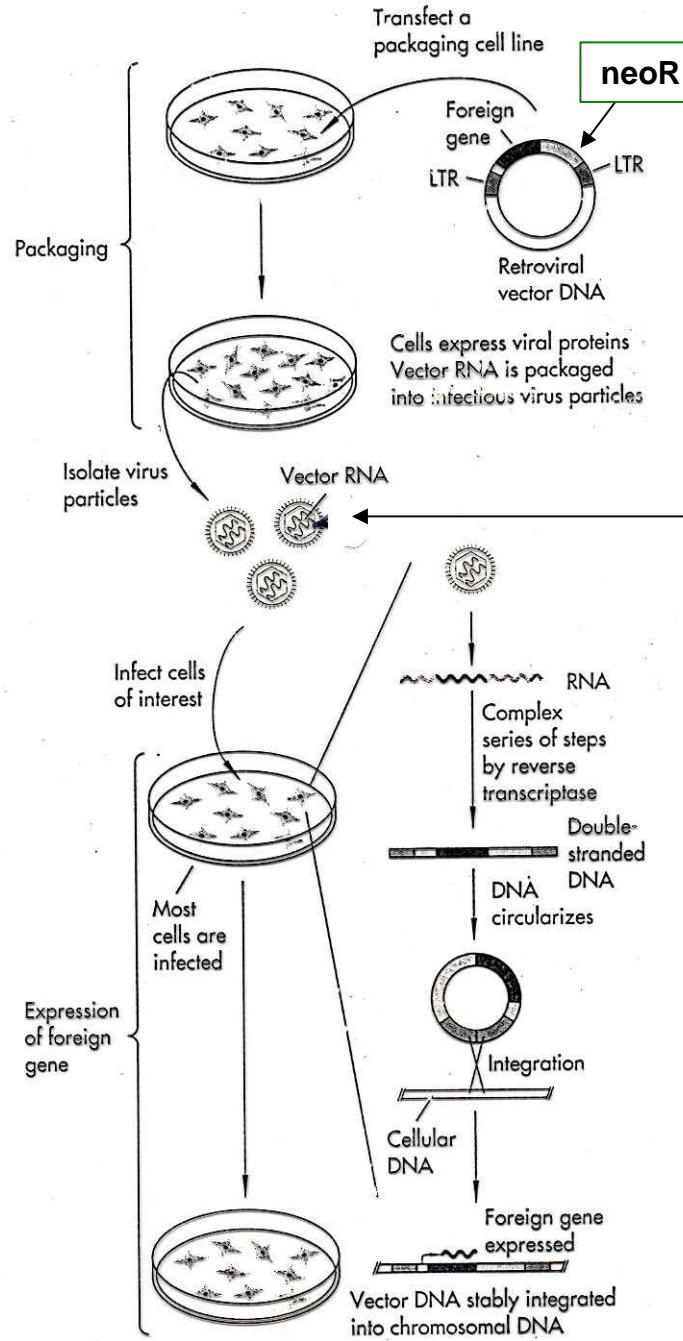

Klonování retrovirových sekvencí do plazmidu, vytvoření kyvadlového vektoru, klonování v E. coli

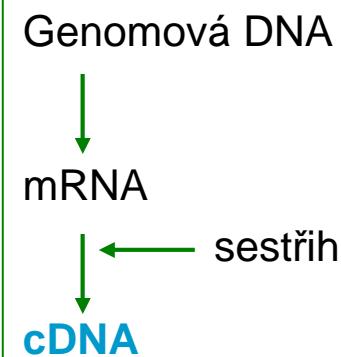


Table 15.2 High-level expression systems in animal cells

Host cell	Mode of transfer	Applications
Monkey COS cell	DEAE dextran or electroporation. Transient	Rapid characterization of constructs and expressed products. Cloning by expression
Chinese hamster ovary cell lines	Stable transfectants. DHFR/Mtx amplification	Constitutive expression, favoured for therapeutic proteins
Various mammalian	Recombinant vaccinia virus	Transient expression in wide range of cells
Various mammalian	Infection by vaccinia expressing T7 RNA pol*	Very high transient expression
Various mammalian and avian	Recombinant retrovirus	Long-term expression, variety of species
Insect cells	Recombinant baculovirus	Very high transient expression

*The recombinant vaccinia virus expresses T7 RNA polymerase in the host cell. Target genes are constructed by linking to T7 promoter and terminator regions. When cells are infected by the recombinant vaccinia virus, and transfected with plasmid containing the target gene, the target gene is expressed at a very high level